



ULTRA BAND-LOK[®] & ULTRA BAND-LOK[®] BLUE

LIGHT CURE CEMENT WITH OR WITHOUT FLUORIDE

INSTRUCTIONS FOR USE



RELIANCE[®]

ORTHODONTIC
PRODUCTS

RELIANCEORTHODONTICS.COM

V1.11.20



ULTRA BAND-LOK® & ULTRA BAND-LOK® BLUE

LIGHT CURE CEMENT WITH OR WITHOUT FLUORIDE

ENGLISH TRANSLATION

INDICATIONS FOR USE:

Ultra Band-Lok® is intended for use as an orthodontic band cement and for occlusal buildups.

INSTRUCTIONS FOR USE:

Band Cementation:


- Thoroughly prophylax the teeth with 1st & Final®. Rinse, dry and isolate.
- Acid etching of the enamel is not required for cementing bands; however, it is recommended when cementing high stress banded appliances
- Apply a bead of Ultra Band-Lok® to the inside of the band.
- Seat band, clean off any excess flash. Position light tip in close proximity to the occlusal surface of the tooth. Moving in a slow circle around the top of the band, light cure for 30 seconds. At this point the cement is fully cured, allowing for immediate placement.


If using the Luer-Loc syringes:

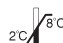
- Unscrew and remove the black storage cap from the tip of the syringe.
- Put the tip in place and twist clockwise until the tip is locked in position.
- When the procedure is completed, remove the tip and replace the black storage cap to keep the Ultra Band-Lok® protected from light.


Occlusal Buildup Application: Prophylax, rinse and dry. Etch occlusal surface for 30 seconds, then rinse, dry and isolate. Apply Ultra Band in the amount and shape required to the occlusal surface. Light cure for 20 seconds. Note: a self-etching primer can be utilized in place of phosphoric acid etching.

Important: Ultra Band-Lok® is sensitive to ambient light. Shield exposed unpolymerized product until the product is ready to be light cured.

 **PRECAUTIONS:** Unpolymerized resins may cause skin sensation in susceptible persons. In case of contact with the skin, wash thoroughly with soap and water. Contact with other tissues: rinse spill area immediately with copious amounts of water for several minutes.

 Use of UV, halogen and LED curing lights can be associated with eye damage. The patient, doctor and the assistant should wear properly designed protective eyewear when using these light curing devices.

 **TEMPERATURE LIMITATION:** Fluoride version store refrigerated (2-8°C). Light Sensitive. Avoid excessive Heat. Allow product to reach room temperature prior to use.

 NonFluoride version room temperature storage (15-30°C).

 Light Sensitive.

TO REORDER:

Syringes with Fluoride:

- Ref# UBLBPP for Ultra Band-Lok® Blue push syringe
- Ref# UBLPP for Ultra Band-Lok® Natural push syringe
- Ref# LLUBLBP for Ultra Band-Lok® Blue Shade Luer-Loc syringe with 10 tips
- Ref# LLUBLP for Ultra Band-Lok® Natural Shade Luer-Loc syringe with 10 tips

Syringes Non-Fluoride:

- Ref# NFUBLBPP for Ultra Band-Lok® Blue push syringe NonFluoride
- Ref# NFUBLPP for Ultra Band-Lok® Natural push syringe NonFluoride
- Ref# NFLLUBLBP for Ultra Band-Lok® Blue Shade Luer-Loc syringe NonFluoride with 10 tips

WARRANTY: Reliance Orthodontic Products Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. Reliance Orthodontic Products, Inc does not accept liability for any damages or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith.

RX ONLY: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

BULGARIAN TRANSLATION

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:

Ultra Band-Lok® е предназначен за употреба като ортодонтически цимент за ленти и за оклузални натрупвания.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

Циментиране на лентата:

- Почистете старателно зъбите с 1st & Final®. Изплакнете, подсушете и изолирайте.
- Ецване с киселина на емайла не е необходимо за циментиране на ленти, но това ще увеличи здравината, необходима за уреди, подложени на голямо напрежение.
- Нанесете топче Ultra Band-Lok® от вътрешната страна на лентата.
- Закрепете лентата, почистете излишното количество. Позиционирайте лекия връх в непосредствена близост до оклузалната повърхност на зъба. Движейки се бавно в кръг около върха на лентата, втвърдете леко за 30 секунди. В този момент циментът е напълно втвърден, което позволява незабавно поставяне.


Ако използвате спринцовките Luer-Loc:


- Развийте и свалете черната капачка за съхранение от върха на спринцовката.
- Поставете върха на място и завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато върхът се фиксира в позиция.
- Когато процедурата приключи, извадете върха и сменете черната капачка за съхранение, за да запазите Ultra Band-Lok® защитен от светлина.

Приложение за оклузивно натрупване: Почистете, изплакнете и подсушете.

Обработете чрез ецване оклузалната повърхност за 30 секунди, след това изплакнете, подсушете и изолирайте. Нанесете Ultra Band в количеството и формата, необходимите за оклузална повърхност. Оставете леко да се втвърди за 20 секунди. Забележка: Вместо фосфорна киселина може да се използва грунд за самостоятелно ецване.

Важно: Ultra Band-Lok® е чувствителен към околната светлина. Предпазете изложения неполимеризиран продукт, докато продуктът не стане готов за леко втвърдяване.

 **ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:** Неполимеризираните смоли може да причинят кожни усещания при чувствителни лица. В случай на контакт с кожата измийте обилно със сапун и вода. Контакт с други тъкани: незабавно изплакнете мястото на разлив с обилно количество вода в продължение на няколко минути.

 Използването на UV, халогенна и LED светлина за втвърдяване може да е свързано с увреждане на очите. Пациентът, лекарят и асистентът трябва да носят правилно проектирани защитни очила, когато използват тези устройства за втвърдяване със светлина.

 **ТЕМПЕРАТУРНО ОГРАНИЧЕНИЕ:** Версията с флуорид се съхранява в хладилник (2–8°C). Чувствителен към светлина. Избягвайте прекомерна топлина.

 Оставете продукта да достигне стайна температура преди употреба.

Версията без флуорид се съхранява на стайна температура без флуорид (15–30°C).

 Чувствителен към светлина.

ЗА ПОВТОРНА ПОРЪЧКА:

Спринцовки с флуорид:

- Реф. № UBLBPP за Ultra Band-Lok® Blue спринцовка с бутало
- Реф. № UBLPP за Ultra Band-Lok® Natural спринцовка с бутало
- Реф. № LLUBLBP за Ultra Band-Lok® Blue Shade Luer-Loc спринцовка с 10 накрайника
- Реф. № LLUBLP за Ultra Band-Lok® Natural Shade Luer-Loc спринцовка с 10 накрайника

Спринцовки без флуорид:

- Реф. № UBLBPP за Ultra Band-Lok® Blue спринцовка с бутало без флуорид
- Реф. № UBLPP за Ultra Band-Lok® Natural спринцовка с бутало без флуорид
- Реф. № NFLLUBLBP за Ultra Band-Lok® Blue Shade Luer-Loc спринцовка без флуорид с 10 накрайника

ГАРАНЦИЯ: Reliance Orthodontics Products Inc. признава своята отговорност да замени продуктите, ако се окаже, че са дефектни. Reliance Orthodontics Products, Inc. не поема отговорност за всякакви вреди или загуби, преки или последващи, произтичащи от употребата или невъзможността за употреба на продуктите така, както е описано. Преди употреба потребителят трябва да определи пригодността на продукта за неговата предназначена употреба. Потребителят поема целия риск и отговорност във връзка с горното.

САМО ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ: Федералният закон ограничава продажбата на това изделие само от или по поръчка на лекар-специалист по дентална медицина.

CZECH TRANSLATION

INDIKACE K POUŽITÍ:

Ultra Band-Lok® je určen k použití jako ortodontický matricovým cement a pro okluzní výstavby.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Cementace matrice:


- Důkladně profylakčně ošetřete zuby pomocí 1st & Final®. Opláchněte, osušte a oddělte.
- Leptání sklovinou kyselinou není pro cementovací matrice vyžadováno; doporučuje se však při cementování silně namáhaných matricových aparátů
- Naneste kuličku Ultra Band-Lok® na vnitřní stranu matrice.
- Matrici usaďte a očistěte veškerý přebytečný přelisek. Umístěte světelný hrot do těsné blízkosti okluzního povrchu zubu. Polymerujte světlem 30 sekund pomalým pohybem v kruhu okolo horní strany matrice. V tomto okamžiku je cement zcela zpolymerovaný, což umožňuje okamžité umístění.


Pokud používáte stříkačky Luer-Loc:

- Odšroubujte a sejměte černý uzávěr ze hrotu stříkačky.
- Nasaďte hrot na místo a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud nebude hrot zajištěn na svém místě.
- Po dokončení postupu sejměte hrot a nasadte zpět černou úložnou krytu, aby byl Ultra Band-Lok® chráněn před světlem.

Nanášení okluzní výstavby: Profylakčně ošetřete, opláchněte a osušte. Okluzní povrch leptejte po dobu 30 sekund, poté opláchněte, osušte a izolujte. Naneste Ultra Kapela v množství a tvaru potřebném pro okluzní povrch. Polymerujte světlem po dobu 20 sekund. Poznámka: Místo leptání kyselinou fosforečnou lze použít samolepací príměr.

Důležité: Ultra Band-Lok® je citlivý na okolní světlo. Obnažený nopolymerizovaný produkt chraňte štítem, dokud produkt nebude připraven k polymeraci světlem.

 **OPATŘENÍ:** Nopolymerizované pryskyřice mohou u vnímavých osob způsobit senzibilizaci kůže. V případě kontaktu s kůží důkladně omyjte mýdlem a vodou. Kontakt s ostatními tkáněmi: plochu zasaženou rozlitím okamžitě oplachujte velkým množstvím vody několik minut.

 Použití UV, halogenových a LED polymeračních světél může být spojeno s poškozením očí. Při používání těchto světelných polymeračních zařízení by měl pacient, lékař a asistent nosit správně navržené ochranné brýle.



OMEZENÍ TEPLoty: Fluoridovou verzi uchovávejte v chladu (2–8°C). Citlivé na světlo. Chraňte před nadměrným teplem. Před použitím nechte produkt dosáhnout pokojové teploty.



Verzi bez fluoridu uchovávejte při teplotě místnosti (15–30°C).



Citlivé na světlo.

OPAKOVANÁ OBJEDNÁVKA:

Stříkačky s fluoridem:

- Ref# UBLBPP pro tlačnou stříkačku Ultra Band-Lok® Blue
- Ref# UBLPP pro tlačnou stříkačku Ultra Band-Lok® Natural
- Ref# LLUBLBP pro stříkačku Ultra Band-Lok® Blue Shade Luer-Loc s 10 hroty
- Ref# LLUBLP pro stříkačku Ultra Band-Lok® Natural Shade Luer-Loc s 10 hroty

Stříkačky bez fluoridu:

- Ref# NFUBLPP pro tlačnou stříkačku Ultra Band-Lok® Blue bez fluoridu
- Ref# NFUBLP pro tlačnou stříkačku Ultra Band-Lok® Natural bez fluoridu
- Ref# NFLUBLBP pro stříkačku Ultra Band-Lok® Blue Shade Luer-Loc bez fluoridu s 10 hroty

ZÁRUKA: Společnost Reliance Orthodontic Products, Inc. uznává svou odpovědnost za výměnu produktů, pokud se ukáže, že jsou vadné. Reliance Orthodontic Products, Inc. nepřijímá odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, přímé nebo následné, vyplývající z použití nebo nemožnosti používat produkty, jak je popsáno. Před použitím je uživatel zodpovědný za určení vhodnosti produktu pro zamýšlené použití. Uživatel přebírá veškerá rizika a odpovědnost v souvislosti s tím.

POUZE NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS: Federální zákon omezuje prodej tohoto zařízení z titulu objednávky zubního lékaře nebo na jejím základě.

DANISH TRANSLATION

INDIKATIONER

Ultra Band-Lok ® er beregnet som en ortodontisk båndcement og til okklusale opbygninger.

BRUGSANVISNING

Båndcementering:


- Rens tænderne grundigt med 1st & Final ®. Skyl, tør og isoler.
- Syreætsning af emaljen er ikke påkrævet til cementering af bånd; Det anbefales dog ved cementering af højt belastede båndanordninger
- Påfør en perle af Ultra Band-Lok ® på indersiden af båndet.
- Anbring båndet, rengør overskydende flash. Placer lysspidsen i nærheden af tandens okklusale overflade. Langsom cirkulende bevægelse omkring toppen af båndet, lyshærd i 30 sekunder. På dette tidspunkt er cementen fuldstændig hærdet, hvilket muliggør øjeblikkelig placering.

Hvis man bruger Luer-Loc sprøjter:


- Skrud den sorte opbevaringshætte af og fjern den fra spidsen af sprøjten.
- Sæt spidsen på plads, og drej med uret, indtil spidsen er låst på plads.
- Når proceduren er afsluttet, fjernes spidsen og den sorte opbevaringshætte sættes på igen for at holde Ultra Band-Lok ® beskyttet mod lys.

Okclusal Buildup-applikation: Rens, skyl og tør. Æts okklusalooverfladen i 30 sekunder, derefter skyl, tør og isoler. Påfør Ultra Band i den mængde og form, der kræves til okklusal o verfladen. Lyshærd i 20 sekunder. Bemærk: en selvætsende primer kan anvendes i stedet for fosforsyreætsning.

Vigtigt: Ultra Band-Lok ® er følsom over for omgivende lys. Beskyt det eksponeredeopolymeriserede produkt, indtil produktet er klar til at blive lyshærdet.

 **FORHOLDSREGLER:** Uopolymeriserede resiner kan forårsage hudreaktion hosfølsomme personer. I tilfælde af kontakt med huden afvaskes grundigt med vand og sæbe. Ved kontakt med andre væv skylles det berørte område straks med rigelig mængde vand i flere minutter.

 Brug af UV-, halogen- og LED-hærdelamper kan forbindes med øjenskader. Patienten, lægen og assistenten bør anvende korrekt designede beskyttelsesbriller ved brug af disse lyshærdende enheder.

 **TEMPERATURBEGRÆNSNING:** Fluoridversion opbevares kølet (2-8°C). Lyfølsom. Undgå overdreven varme. Lad produktet nå stuetemperatur inden brug.

  NonFluoride-version opbevaring stuetemperatur (15-30°C).

 Lyfølsom.

GENBESTILLING

Sprøjter med fluorid:

- Ref# UBLBPP for Ultra Band-Lok® Blue push syringe
- Ref# UBLPP for Ultra Band-Lok® Natural push syringe
- Ref# LLUBLBP for Ultra Band-Lok® Blue Shade Luer-Loc syringe with 10 tips
- Ref# LLUBLP for Ultra Band-Lok® Natural Shade Luer-Loc syringe with 10 tips

Sprøjter ikke-fluorid:

- Ref# NFUBLBPP for Ultra Band-Lok® Blue push syringe NonFluoride
- Ref# NFUBLPP for Ultra Band-Lok® Natural push syringe NonFluoride
- Ref# NFLLUBLBP for Ultra Band-Lok® Blue Shade Luer-Loc syringe NonFluoride with 10 tips.

GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc. påtager sig ansvaret for at erstatte et produkt, der viser sig at være defekt. Reliance Orthodontic Products, Inc. påtager sig intet ansvar for skader eller tab, direkte eller efterfølgende, der skyldes brugen af eller manglende kendskab til brug af produkterne som foreskrevet. Det er brugerens ansvar at vurdere før brug, om produktet er egnet til den tilsigtede anvendelse. Brugeren påtager sig enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse med brugen.

KUN ORDINATION: Føderal lov forbeholder dette produkt udelukkende til salg eller ordre fra en tandlæge.

GERMAN TRANSLATION

ANWENDUNGSHINWEISE :

Ultra Band-Lok® ist zur Verwendung als kieferorthopädischer Bandzement und für okklusale Aufbauten vorgesehen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Bandzementierung:

- Gründliche Reinigung der Zähne mit 1st & Final®. Spülung, Trocknung und Isolierung.
- Eine Konditionierung des Zahnschmelzes ist für die Zementierung von Bändern nicht erforderlich; sie wird jedoch für die Zementierung von stark beanspruchten Bandapparaturen empfohlen.
- Ein Kügelchen Ultra Band-Lok® auf die Innenseite des Bandes auftragen.
- Das Band einpassen und überschüssige Grate entfernen. Die Lichtspitze in unmittelbarer Nähe der Okklusionsfläche des Zahnes positionieren. Mit einer langsamen Kreisbewegung um die Spitze des Bandes herum 30 Sekunden lang mit Licht aushärten. Zu diesem Zeitpunkt ist der Zement vollständig ausgehärtet, so dass er sofort platziert werden kann.

Bei Verwendung der Luer-Lock-Spritzen:

- Die schwarze Aufbewahrungskappe von der Kanüle der Spritze abschrauben und entfernen.
- Die Kanüle einsetzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis sie in ihrer Position verriegelt ist.
- Nach Abschluss des Vorgangs die Kanüle entfernen und die schwarze Aufbewahrungskappe wieder aufsetzen, um den Ultra Band-Lok® vor Licht zu schützen.

Anwendung für okklusale Aufbauten: Reinigung, Spülung und Trocknung. Die Okklusionsfläche 30 Sekunden lang ätzen, danach spülen, trocknen und isolieren. Ultra Band in der erforderlichen Menge und Form auf die Okklusionsfläche auftragen. 20 Sekunden lang mit Licht aushärten. Hinweis: Anstelle der Phosphorsäure-Ätzung kann ein selbstätzender Primer verwendet werden.

Wichtig: Ultra Band-Lok® ist empfindlich gegenüber Umgebungslicht. Das freiliegende unpolymerisierte Produkt abschirmen, bis es lichtgehärtet werden kann.

⚠ VORSICHTSMASSNAHMEN: Unpolymerisierte Harze können bei empfindlichen Personen eine Hautempfindung hervorrufen. Bei Berührung mit der Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen. Kontakt mit anderem Gewebe: Betroffenen Bereich sofort mehrere Minuten lang mit reichlich Wasser ausspülen.

⚠ Die Verwendung von UV-, Halogen- und LED-Härtungslampen kann mit Augenschäden einhergehen. Der Patient, der Arzt und die Assistenzkraft sollten bei Verwendung dieser Lichthärtungsgeräte eine ordnungsgemäß ausgelegte Schutzbrille tragen.

2°C 8°C **TEMPERATURBEGRENZUNG:** Fluorid-Version gekühlt lagern (2-8°C). Lichtempfindlich. Übermäßige Hitze vermeiden. Das Produkt vor der Verwendung Raumtemperatur erreichen lassen.

15°C 30°C Lagerung der Version ohne Fluorid bei Raumtemperatur (15-30°C).

Lichtempfindlich.

ZUR NACHBESTELLUNG:

Spritzen mit Fluorid:

- Referenz# UBLBPP für Ultra Band-Lok® Blau Push-Spritze
- Ref# UBLPP für Ultra Band-Lok® Natürlich Push-Spritze
- Ref# LLUBLBP für Ultra Band-Lok® Blauer Farbton Luer-Lock-Spritze mit 10 Kanülen
- Ref# LLUBLP für Ultra Band-Lok® Natürlicher Farbton Luer-Lock-Spritze mit 10 Kanülen

Spritzen ohne Fluorid:

- Referenz# NFUBLBPP für Ultra Band-Lok® Blau Push-Spritze ohne Fluorid
- Ref# NFUBLPP für Ultra Band-Lok® Natürlich Push-Spritze ohne Fluorid
- Ref# NFLLUBLBP für Ultra Band-Lok® Blauer Farbton Luer-Lock-Spritze ohne Fluorid mit 10 Kanülen

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products, Inc. nimmt seine Verantwortung ernst und ersetzt Produkte, die nachweislich defekt sind. Reliance Orthodontic Products, Inc. übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Produkte resultieren bzw. aus dem Unvermögen, diese gemäß der Beschreibung anzuwenden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, vor dem Gebrauch des Produkts dessen Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Der Benutzer übernimmt das gesamte Risiko und die damit zusammenhängende Haftung.

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIG: darf dieses Produkt nur durch einen Zahnarzt oder auf Anordnung eines Zahnarztes abgegeben werden.

GREEK TRANSLATION

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Το Ultra Band-Lok® προορίζεται για χρήση ως κονία ορθοδοντικών δακτυλίων και για ανασυστάσεις στη μασητική επιφάνεια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Εκλήρωση δακτυλίου με κονία:


- Προφυλάξτε καλά τα δόντια με το 1st & Final®. Ξεπλύνετε, στεγνώστε και απομονώστε.
- Για τους δακτυλίους συγκόλλησης με κονία δεν απαιτείται αδροποίηση με οξύ της αδμαντίνης, ωστόσο, συνιστάται για τη συγκόλληση με κονία συσκευών με δακτυλίους όταν ασκούνται υψηλές τάσεις
- Εφαρμόστε μια σταγόνα Ultra Band-Lok® στο εσωτερικό του δακτυλίου.
- Τοποθετήστε τον δακτύλιο, αφαιρέστε την περίσσεια υλικού. Τοποθετήστε το άκρο φωτοπολυμερισμού σε κοντινή απόσταση από τη μασητική επιφάνεια του δοντιού. Μετακινώντας το αργά και κυκλικά γύρω από την κορυφή του δακτυλίου, φωτοπολυμερίστε για 30 δευτερόλεπτα. Σε αυτό το σημείο η κονία έχει πολυμεριστεί πλήρως και μπορεί να τοποθετηθεί αμέσως.


Εάν χρησιμοποιείτε τις σύριγγες με Luer-Lock:

- Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το μαύρο πώμα αποθήκευσης από το ρύγχος της σύριγγας.
- Τοποθετήστε το ρύγχος στην κατάλληλη θέση και περιστρέψτε δεξιόστροφα μέχρι το ρύγχος να ασφαλίσει στη θέση του.
- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, αφαιρέστε το ρύγχος και αντικαταστήστε το μαύρο πώμα αποθήκευσης για να διατηρήσει το Ultra Band-Lok® προστατευμένο από το φως.


Εφαρμογή ανασύστασης στη μασητική επιφάνεια: Προφυλάξτε, ξεπλύνετε και στεγνώστε. Αδροποιήστε τη μασητική επιφάνεια για 30 δευτερόλεπτα, κατόπιν ξεπλύνετε, στεγνώστε και απομονώστε. Εφαρμόστε την απαιτούμενη ποσότητα Ultra Band με το κατάλληλο σχήμα στη μασητική επιφάνεια. Φωτοπολυμερίστε για 20 δευτερόλεπτα. Σημείωση: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας ενεργοποιητής αυτοαδρόποιησης αντί του αδροποιητικού φωσφορικού οξέος.

Σημαντικό: Το Ultra Band-Lok® είναι ευαίσθητο στο φως του περιβάλλοντος. Καλύψτε το εκτεθειμένο μη πολυμερισμένο προϊόν έως ότου το προϊόν είναι έτοιμο για φωτοπολυμερισμό.

 **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** Οι μη πολυμερισμένες ρητίνες μπορεί να προκαλέσουν δερματική αντίδραση σε ευπαθή άτομα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε προσεκτικά με σαπούνι και νερό. Επαφή με άλλους ιστούς: ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με άβουνη ποσότητα νερού για αρκετά λεπτά.

 Η χρήση λυχνιών πολυμερισμού UV, αλογόνου και LED μπορεί να επιφέρει οφθαλμική βλάβη. Ο ασθενής, ο ιατρός και ο βοηθός θα πρέπει να φορούν κατάλληλα σχεδιασμένα

προστατευτικά γυαλιά κατά τη χρήση αυτών των συσκευών φωτοπολυμερισμού.

 **ΟΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ:** Η έκδοξη με φθόριο πρέπει να φυλάσσεται στο ψυγείο (2-8°C). Ευαίσθητο στο φως. Αποφύγετε την υπερβολική θερμότητα. Περιμένετε μέχρι το προϊόν να φθάσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση.

 Η έκδοξη χωρίς φθόριο πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου (15-30°C).

 Ευαίσθητο στο φως.

ΓΙΑ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

Σύριγγες με φθόριο:

- Αριθμός αναφοράς UBLBPP για τη σύριγγα με έμβολο Ultra Band-Lok® σε μπλε απόχρωση
- Αριθμός αναφοράς UBLPP για τη σύριγγα με έμβολο Ultra Band-Lok® σε φυσική απόχρωση
- Αριθμός αναφοράς LLUBLBP για τη σύριγγα με Luer-Lock με Ultra Band-Lok® σε μπλε απόχρωση με 10 ρύγχη
- Αριθμός αναφοράς LLUBLBP για τη σύριγγα με Luer-Lock με Ultra Band-Lok® σε φυσική απόχρωση με 10 ρύγχη

Σύριγγες χωρίς φθόριο:

- Αριθμός αναφοράς NFUBLBPP για τη σύριγγα με έμβολο Ultra Band-Lok® σε μπλε απόχρωση χωρίς φθόριο
- Αριθμός αναφοράς NFUBLPP για τη σύριγγα με έμβολο Ultra Band-Lok® σε φυσική απόχρωση χωρίς φθόριο
- Αριθμός αναφοράς NLLUBLBP για τη σύριγγα με Luer-Lock με Ultra Band-Lok® σε μπλε απόχρωση χωρίς φθόριο με 10 ρύγχη

ΕΓΓΥΗΣΗ: Η Reliance Orthodontic Products Inc. αναγνωρίζει την ευθύνη της να αντικαταστήσει τα προϊόντα εάν αποδειχθεί ότι είναι ελαττωματικά. Η Reliance Orthodontic Products, Inc. δεν αποδέχεται ευθύνη για οποιοσδήποτε ζημιάς ή απώλειες, άμεσες ή παρεπόμενες, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης των προϊόντων όπως περιγράφεται. Πριν από τη χρήση, αποτελεί ευθύνη του χρήστη να καθορίσει την καταλληλότητα του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση του. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο και ευθύνη σε σχέση με το παρόν.

ΜΟΝΟ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: Ο ομοσπονδιακός νόμος περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο από ή κατόπιν εντολής οδοντιάτρου.

SPANISH TRANSLATION

INDICACIONES DE USO:

Ultra Band-Lok® está diseñado para el uso como cemento de banda ortodóntica y para reconstrucciones oclusales.

INSTRUCCIONES DE USO:


Cementado de bandas:


- Realice la profilaxis completa de los dientes con 1st & Final®. Enjuague, seque y aísle.
- No es necesario realizar el grabado ácido del esmalte para cementar las bandas. Sin embargo, se recomienda para cementar aparatos de alta tensión.
- Aplique una gota de Ultra Band-Lok® en el interior de la banda.
- Posicione la banda, limpie cualquier exceso de producto. Coloque la punta de la luz bien cerca de la superficie oclusal del diente. Muévela en círculos lentamente alrededor de la parte superior de la banda y fotopolimerice durante 30 segundos. En este punto, el cemento está completamente polimerizado, lo que permite una colocación inmediata.


Si se usan las jeringas Luer-Loc:

- Desenrosque y retire la tapa negra de almacenamiento de la punta de la jeringa.
- Coloque la punta y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que la punta quede fija en su posición.
- Cuando haya finalizado el procedimiento, retire la punta y vuelva a colocar la tapa negra de almacenamiento para mantener el Ultra Band-Lok® protegido de la luz.
- Aplicación en la reconstrucción oclusal: Realice la profilaxis, enjuague y seque. Grabe la superficie oclusal durante 30 segundos, luego enjuague, seque y aísle. Aplique Ultra Band en la cantidad y forma requerida para la superficie oclusal. Fotopolimerice durante 20 segundos. Nota: en lugar del grabado con ácido fosfórico se puede utilizar un primer self-etch.

Importante: Ultra Band-Lok® es sensible a la luz ambiental. Cubra el producto no polimerizado expuesto hasta que el producto esté listo para la fotopolimerización.

 **PRECAUCIONES:** Las resinas no polimerizadas pueden provocar sensibilidad cutánea en personas susceptibles. En caso de contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón. Contacto con otros tejidos: enjuague el área de derrame inmediatamente con abundante agua durante varios minutos.

 El uso de luces UV, halógenas y lámparas LED para polimerización puede estar asociado con daño ocular. El paciente, el médico y el asistente deben usar gafas protectoras debidamente diseñadas cuando utilicen estos dispositivos de fotopolimerización.

 **LIMITACIÓN DE TEMPERATURA:** Conserve la versión con flúor refrigerada (2-8°C). Sensible a la luz. Evite el exceso de temperatura. Deje que el producto alcance la temperatura ambiente antes de usarlo.

 Conserve a temperatura ambiente en la versión sin flúor (15-30°C).

 Sensible a la luz.

INFORMACIÓN PARA NUEVOS PEDIDOS:

Jeringas con flúor:

- Ref# UBLBPP para la jeringa de empuje Ultra Band-Lok® Azul
- Ref# UBLPP para la jeringa de empuje Ultra Band-Lok® Natural
- Ref# LLUBLBP para la jeringa Luer-Loc Ultra Band-Lok® Tono azul con 10 puntas
- Ref# LLULBP para la jeringa Luer-Loc Ultra Band-Lok® Tono natural con 10 puntas

Jeringas sin flúor:

- Ref# NFUBLBPP para la jeringa de empuje Ultra Band-Lok® Azul sin flúor
- Ref# NFUBLPP para la jeringa de empuje Ultra Band-Lok® Natural sin flúor
- Ref# NFLLUBLBP para la jeringa Luer-Loc Ultra Band-Lok® Tono azul sin flúor con 10 puntas

GARANTÍA: Reliance Orthodontic Products Inc. reconoce su responsabilidad de reemplazar los productos si se demuestra que son defectuosos. Reliance Orthodontic Products, Inc. no asume responsabilidad alguna por daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que surjan del uso o de la incapacidad para usar los productos como se describe. Antes de usar el producto, es responsabilidad del usuario determinar si es adecuado para el uso previsto. El usuario asume todo el riesgo y la responsabilidad en relación con ello.

VENTA BAJO RECETA: Las leyes federales de los EE.UU. exigen que la venta de este dispositivo se realice solo a través de un profesional odontológico o por indicación de este.

FRENCH TRANSLATION

INDICATIONS D'UTILISATION :

L'Ultra Band-Lok® est destiné à être utilisé comme ciment pour des bagues orthodontiques et pour des constructions occlusales.

MODE D'EMPLOI :

Cimentation des bagues :


- Procéder à la prophylaxie complète des dents avec la pierre ponce 1st & Final®. Rincer, sécher et isoler.
- Le mordantage de l'émail n'est pas nécessaire pour cimenter les bagues, mais il est recommandé pour cimenter des bagues qui subiront de fortes contraintes
- Appliquer une goutte d'Ultra Band-Lok® à l'intérieur de la bague.
- Fixer la bague et enlever l'excédent de produit. Positionner la pointe de la lampe à proximité de la surface occlusale de la dent. En se déplaçant lentement en cercle autour du haut de la bague, photopolymériser pendant 30 secondes. À ce stade, le ciment est complètement durci, ce qui permet une mise en place immédiate.


En cas d'utilisation de seringues Luer-Loc :

- Dévisser et retirer le capuchon de stockage noir de l'embout de la seringue.
- Mettre l'embout en place et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en position.
- Une fois la procédure terminée, retirer l'embout et refermer le capuchon de stockage noir pour protéger l'Ultra Band-Lok® de la lumière.

Application de construction occlusale : Procéder à la prophylaxie, au rinçage et séchage. Mordancer la surface occlusale pendant 30 secondes, puis rincer, sécher et isoler. Appliquer Ultra Band en quantité et en forme requises sur la surface occlusale. Photopolymériser pendant 20 secondes. Remarque : un apprêt d'auto-mordantage peut également être utilisé à la place d'un agent de mordantage à l'acide phosphorique.

Important : L'Ultra Band-Lok® est sensible à la lumière ambiante. Protéger le produit non polymérisé jusqu'à ce qu'il soit prêt à être photopolymérisé.

 **PRÉCAUTIONS :** Les résines non polymérisées peuvent provoquer des sensations cutanées chez les personnes sensibles. En cas de contact avec la peau, se laver soigneusement à l'eau avec du savon. Contact avec d'autres tissus : rincer immédiatement la zone atteinte abondamment avec de l'eau, pendant plusieurs minutes.

 L'utilisation de lampes UV, halogènes et LED peut être associée à des lésions oculaires. Le patient, le praticien et l'assistant doivent porter des lunettes de protection spécialement conçues à cet effet lorsqu'ils utilisent ces appareils de photopolymérisation.



LIMITES DE LA TEMPÉRATURE : La version fluorée doit être conservée au réfrigérateur (2-8°C). Sensible à la lumière. Éviter les chaleurs excessives. Laisser le produit atteindre la température ambiante avant de l'utiliser.



La version fluorée doit être conservée à température ambiante (15-30°C).



Sensible à la lumière.

POUR TOUTE NOUVELLE COMMANDE :

Seringues avec du fluor :

- Ref# UBLBPP pour la seringue à pousser Ultra Band-Lok® Bleu
- Ref# UBLPP pour la seringue à pousser Ultra Band-Lok® Naturel
- Ref# LLUBLBP pour la seringue Luer-Loc Ultra Band-Lok® Teinte bleue, avec 10 embouts
- Ref# LLUBLP pour la seringue Luer-Loc Ultra Band-Lok® Teinte naturelle, avec 10 embouts

Seringues non fluorées :

- Ref# NFUBLBPP pour la seringue à pousser Ultra Band-Lok® Bleu Non fluoré
- Ref# NFUBLPP pour la seringue à pousser Ultra Band-Lok® Naturel Non fluoré
- Ref# NFLLUBLBP pour la seringue Luer-Loc Ultra Band-Lok® Teinte bleue, avec 10 embouts

GARANTIE : Reliance Orthodontic Products, Inc. reconnaît sa responsabilité de remplacer les produits s'il est prouvé qu'ils sont défectueux. Reliance Orthodontic Products, Inc. décline toute responsabilité pour tout dommage ou perte, direct(e) ou indirect(e), découlant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser les produits selon les indications. Avant l'utilisation, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à l'usage auquel il est destiné. L'utilisateur assume tous les risques et responsabilités y afférents.

UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE : La loi fédérale limite la vente de ce dispositif à la vente par ou sur ordre d'un professionnel dentaire.

CROATIAN TRANSLATION

INDIKACIJE ZA UPOTREBU:

Proizvod Ultra Band-Lok ® namijenjen je za upotrebu u vidu ortodontskog cementa za prstenove i okluzijske dodatke.

UPUTE ZA UPOTREBU:

Cementiranje prstenova:


- Temeljito profilirajte zube sredstvom 1st & Final®. Isperite, osušite i izolirajte.
- Za cementiranje prstenova nije potrebno jetkanje cakline kiselinom; međutim, preporučuje se kod cementiranja prstenova za naprave koje su pod velikim stresom
- Nanesite proizvod Ultra Band-Lok® na unutarnju stranu prstena.
- Postavite prsten, očistite višak sredstva. Postavite svjetlosni vrh u neposrednoj blizini okluzijske površine zuba. Laganim kružnim pokretima oko vrha prstena tretirajte svjetlošću za učvršćivanje u trajanju od 30 sekundi. Nakon toga cement je potpuno učvršćen, što omogućava trenutno postavljanje.


Ako koristite Luer-Loc štrcaljke:

- Odvijte i skinite crni poklopac za pohranu s vrha štrcaljke.
- Postavite vrh na mjesto i uvijte u smjeru kazaljke na satu dok se vrh ne zaključa u svom položaju.
- Nakon završetka postupka skinite vrh i vratite crni poklopac za pohranu kako bi proizvod Ultra Band-Lok ® bio zaštićen od svjetlosti.

Prijema za okluzijski dodatak: Profilirajte, isperite i osušite. Provedite jetkanje tijekom 30 sekundi, a zatim isperite, osušite i izolirajte. Nanesite Ultra Band u iznosu i obliku potrebnom za okluzijsku površinu. Tretirajte svjetlošću tijekom 20 sekundi. Napomena: Umjesto jetkanja fosfornom kiselinom može se upotrijebiti prajmer za samojetkanje.

Važno: Ultra Band-Lok® je osjetljiv na ambijentalno svjetlo. Zaštite izloženi nepolimerizirani proizvod sve dok ne bude spreman na svjetlosno učvršćivanje.

 **MJERE OPREZA:** Napolimerizirane smole mogu kod osjetljivih osoba izazvati reakcije na koži. U slučaju dodira s kožom, temeljito je operite sapunom i vodom. Kontakt s ostalim tkivima: područje na kojem je došlo do izljeva odmah isperite obilnim količinama vode nekoliko minuta.

 Korištenje UV, halogenog i LED svjetla za učvršćivanje može izazvati oštećenje očiju. Pacijent, liječnik i asistent trebaju koristiti propisno dizajnirane zaštitne naočale za vrijeme upotrebe uređaja za svjetlosno učvršćivanje.



OGRANIČENJE TEMPERATURE: Fluoridnu verziju čuvajte u hladnjaku (2-8°C). Osjetljivo na svjetlo. Izbjegavajte pretjeranu toplinu. Ostavite proizvodu da postigne sobnu temperaturu prije upotrebe.



Nefluoridna verzija čuva se na sobnoj temperaturi (15-30°C).



Osjetljivo na svjetlo.

PODACI ZA NARUŽBU:

Špricevi s fluoridom:

- Ref br. UBLBPP za Ultra Band-Lok ® Plavu potisnu štrcaljku
- Ref br. UBLPP za Ultra Band-Lok ® prirodnu potisnu štrcaljku
- Ref br. LLUBLBP za Ultra Band-Lok ® plavu nijansu Luer-Loc štrcaljke s 10 vrhova
- Ref br. LLULBP za Ultra Band-Lok ® prirodnu nijansu Luer-Loc štrcaljke s 10 vrhova

Štrcaljke bez fluorida:

- Ref br. NFUBLBPP za Ultra Band-Lok ® plavu potisnu nefluoridnu štrcaljku
- Ref br. NFUBLPP za Ultra Band-Lok ® prirodna potisna nefluoridna štrcaljka
- Ref br. NFFLUBLBP za Ultra Band-Lok ® plavu nijansu Luer-Loc nefluoridnu štrcaljku s 10 vrhova

JAMSTVO: Reliance Orthodontic Products Inc. prihvaća odgovornost za zamjenu proizvoda ako se dokaže da su neispravni. Reliance Orthodontic Products, Inc. ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, izravan ili posljedičan, koji proizlazi iz upotrebe ili nesposobnosti da se proizvod upotrebljava kako je opisano. Prije upotrebe, korisnik je dužan utvrditi prikladnost proizvoda za njegovu predviđenu namjenu. Korisnik preuzima sav rizik i odgovornost u vezi s navedenim.

SAMO NA RX: Savezni zakon ograničava kupovinu ovog proizvoda na stomatološke radnike ili po njihovom nalogu.

HUNGARIAN TRANSLATION

ALKALMAZÁSI JAVALLATOK:

Az Ultra Band-Lok® ortodontiai gyűrűcementként és okkluzális felépítményekhez történő felhasználásra szolgál.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Gyűrű cementálás:


- A fogakat polírozza alaposan a 1st & Final ® készítménnyel. Öblítse le, szárítsa meg és izolálja.
- A zománc savazása nem szükséges a gyűrűk cementálásához; ugyanakkor nagy igénybevételnek kitett gyűrűs készülékeket cementálásakor ajánlott.
- Vigyen fel egy csepp Ultra Band-Lok® készítményt a gyűrű belsejére.
- Helyezze fel a gyűrűt, távolítsa el a felesleges anyagot. Helyezze a lámpahegyet a fog okkluzális felszínének közvetlen közelébe. A gyűrű tejeje körül lassú köröket leírva fotopolimerizáljon 30 másodpercig. Ezen a ponton a cement teljesen megkeményedik, lehetővé téve azonnali felhelyezését.


Amennyiben Luer-Loc fecskendőket használ:

- Csavarja le és távolítsa el a fekete zárókupakot a fecskendő végéről.
- Helyezze a hegyet a helyére, és csavarja az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a hegy a kívánt állásban rögzül.
- Az eljárás befejezése után vegye le a hegyét és helyezze vissza a fekete zárókupakot, hogy az Ultra Band-Lok ® fénytől védett legyen.

Okkluzális felépítmény felhelyezés: Polírozza, öblítse le és szárítsa meg. Savazza az okkluzális felszint 30 másodpercig, majd öblítse le, szárítsa meg és izolálja. Vigye fel az Ultra Band-et a szükséges mennyiségben és formában az okkluzális felszínre. Fotopolimerizáljon 20 másodpercig. Megjegyzés: a foszforsavas maratás helyett alkalmazható önsavazó primer.

Fontos: Az Ultra Band-Lok ® érzékeny a környezeti fényre. Takarja le a szabadon hagyott, nem polimerizált terméket, amíg a termék készen nem áll a fotopolimerizálásra.

 **ÓVINTÉZKEDÉSEK:** A nem polimerizált gyanták az arra érzékeny személyeknél bőrirritációt okozhatnak. Bőrrel való érintkezés esetén alaposan mossa le szappannal és vízzel. Egyéb szövetekkel történő érintkezés: a szivárgással érintett területet azonnal, több percig öblítse le bőséges mennyiségű vízzel.

 Az UV, halogén és LED polimerizációs lámpák használata szemkárosodással járhat. A betegek, az orvosnak és az asszisztensnek a fotopolimerizációs eszközök használata során megfelelően kialakított védőszemüveget kell viselnie.



HŐMÉRSÉKLETKORLÁTOZÁS: A fluoridot tartalmazó változat hűtőszekrényben (2-8°C) tárolandó. Fényérzékeny. Kerülje a túlzott hőt. Használat előtt hagyja, hogy a termék elérje a szobahőmérsékletet.



A fluoridmentes változat szobahőmérsékleten (15-30°C) tárolandó.



Fényérzékeny.

AZ UTÁNRENDELÉSHEZ:

Fecskendők fluoriddal:

- Ref# UBLBPP az Ultra Band-Lok® kék nyomófecskendő
- Ref# UBLPP az Ultra Band-Lok® bézs nyomófecskendő
- Ref# LLUBLBP az Ultra Band-Lok® kék színárnyalatú Luer-Loc fecskendő 10 heggyel
- Ref# LLUBLP az Ultra Band-Lok ® természetes színárnyalatú Luer-Loc fecskendő 10 heggyel

Fluoridmentes fecskendők:

- Ref# NFUBLBPP az Ultra Band-Lok ® kék nyomófecskendő, fluoridmentes
- Ref# NFUBLPP az Ultra Band-Lok® természetes nyomófecskendő fluoridmentes
- Ref# NFLUBLBP az Ultra Band-Lok® kék színárnyalatú Luer-Loc fecskendő, fluoridmentes, 10 heggyel

GARANCIA: A Reliance Orthodontic Products Inc. felelősséget vállal a hibásnak bizonyuló termékekért. A Reliance Orthodontic Products, Inc. nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy következményes kárért vagy veszteségért, amely a termékeknek a leirtak szerinti felhasználásából vagy a helyes használat képességének hiányából fakad. Használat előtt a felhasználó felelőssége annak meghatározása, hogy a termék alkalmas-e a rendeltetésszerű felhasználásra. Ezzel kapcsolatban minden kockázat és felelősség a felhasználót terhel.

KIZÁRÓLAG ORVOSI RENDELVÉNYRE: A szövetségi törvények értelmében az eszköz kizárólag fogászati rendelvényre vagy fogszakorvos részére értékesíthető.

ITALIAN TRANSLATION

INDICAZIONI PER L'USO

Ultra Band-Lok® è concepito per l'uso come cemento per bande ortodontiche e per rialzi occlusali.

ISTRUZIONI PER L'USO

Cementazione delle bande:


- Eseguire un'accurata profilassi dei denti con 1st & Final®. Risciacquare, asciugare e isolare.
- La mordenzatura con acido dello smalto non è necessaria per la cementazione delle bande; tuttavia, è raccomandata quando si cementano apparecchi con bande ad alta sollecitazione
- Applicare una piccola quantità di Ultra Band-Lok® all'interno della banda.
- Posizionare la banda e eliminare l'eccesso di sbavature. Posizionare la punta della lampada in prossimità della superficie occlusale del dente. Muovendosi effettuando un lento cerchio intorno alla parte superiore della banda, fotopolimerizzare per 30 secondi. A questo punto il cemento è completamente indurito e consente un posizionamento immediato.


Se si utilizzano siringhe Luer-Lock:

- Svitare e rimuovere il tappo nero dalla punta della siringa.
- Mettere la punta in posizione e ruotare in senso orario fino a quando la punta non è bloccata in posizione
- Al termine della procedura, rimuovere la punta e sostituire il tappo nero per mantenere Ultra Band-Lok® protetto dalla luce.


Applicazione per rilievo occlusale: Eseguire la profilassi, risciacquare e asciugare. Mordenzare la superficie occlusale per 30 secondi, quindi risciacquare, asciugare e isolare. Applicare Ultra Band nella quantità e nella forma desiderata sulla superficie occlusale. Fotopolimerizzare per 20 secondi. Nota: è possibile utilizzare un primer automordenzante invece di un mordenzante a base di acido fosforico.


Importante: Ultra Band-Lok® è sensibile alla luce. Proteggere il prodotto esposto non polimerizzato fino a quando il prodotto è pronto per essere fotopolimerizzato.

 **PRECAUZIONI:** Le resine non polimerizzate possono causare sensibilizzazione cutanea nelle persone predisposte. In caso di contatto con la pelle, lavare accuratamente con acqua e sapone. Contatto con altri tessuti: risciacquare immediatamente l'area di fuoriuscita con abbondanti quantità di acqua per vari minuti.

 L'uso di lampade polimerizzanti UV, alogene e LED può essere associato a danni agli occhi. Il paziente, il medico e l'assistente devono indossare protezioni oculari

adeguatamente progettate quando si utilizzano questi dispositivi di fotopolimerizzazione.

 **LIMITI DI TEMPERATURA:** Conservare la versione al fluoro refrigerata (2-8°C). Sensibile alla luce. Evitare il calore eccessivo. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima dell'uso.

 Conservare la versione senza fluoro a temperatura ambiente (15-30°C).

 Sensibile alla luce.

PER IL RIORDINO:

Siringhe con Fluoro:

- Rif# UBLBPP per siringa a pressione Ultra Band-Lok® Blue
- Rif# UBLPP per siringa a pressione Ultra Band-Lok® Natural
- Rif# LLUBLBP per siringa Luer-Lock Ultra Band-Lok® colore blu con 10 punte
- Rif# LLUBLP per siringa Luer-Lock Ultra Band-Lok® colore naturale con 10 punte

Siringhe senza fluoro:

- Rif# NFUBLBPP per siringa a pressione Ultra Band-Lok® Blue senza fluoro
- Rif# NFUBLPP per siringa a pressione Ultra Band-Lok® Natural senza fluoro
- Rif# NFLLUBLBP per siringa Luer-Lock Ultra Band-Lok® colore blu senza fluoro con 10 punte

GARANZIA: Reliance Orthodontic Products, Inc. si assume la responsabilità per la sostituzione dei prodotti qualora se ne dimostri la difettosità. Reliance Orthodontic Products, Inc. non si assume responsabilità per eventuali danni o perdite, diretti o conseguenti, derivanti dall'uso o dall'incapacità di usare i prodotti così come descritti. Prima dell'uso, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'adeguatezza del prodotto per l'uso previsto. L'utilizzatore si fa carico di tutti i rischi e della responsabilità legati all'uso.

SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA: la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo a odontoiatri o su prescrizione medica.

DUTCH TRANSLATION

INDICATIES VOOR GEBRUIK:

Ultra Band-Lok® is bedoeld voor gebruik als orthodontisch bandcement en voor occlusale opbouw.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Bandcementeren:


- De tanden met 1st & Final® grondig reinigen. Spoel, droog en isoleer.
- Zuuretsen van het email is niet nodig voor het cementeren van banden; het is echter wel aan te bevelen bij het cementeren van banden met hoge druk.
- Breng een druppel Ultra Band-Lok® aan op de binnenkant van de band.
- Breng de band aan, verwijder overtollige pasta. Plaats de lichtpunt in de nabijheid van het occlusale oppervlak van de tand. In een langzame cirkel rond de bovenkant van de band bewegen, lichtuitharden gedurende 30 seconden. Op dit punt is het cement volledig uitgehard, waardoor het onmiddellijk kan worden geplaatst.


Bij gebruik van de Luer-Loc-spuiten:

- Schroef de zwarte voorraaddop los en verwijder deze van de punt van de spuit.
- Zet de punt op zijn plaats en draai met de klok mee totdat de punt vergrendeld is.
- Wanneer de procedure is voltooid, verwijdt u de punt en plaatst u de zwarte opslagop terug om de Ultra Band-Lok® tegen licht te beschermen.

Toepassing voor occlusale opbouw: Reinig, spoel en droog. Ets het occlusale oppervlak gedurende 30 seconden, spoel dan af, droog en isoleer. Breng Ultra Band aan in de hoeveelheid en de vorm die nodig zijn voor het occlusale oppervlak. Lichtuitharding gedurende 20 seconden. Opmerking: er kan een zelfetsende primer worden gebruikt in plaats van een ets met fosforzuur.

Belangrijk: Ultra Band-Lok® is gevoelig voor omgevingslicht. Scherm het ongepolymeriseerde product af tot het product klaar is om met licht te worden uitgehard.

 **LET OP:** Ongepolymeriseerde harsen kunnen bij gevoelige personen huidirritatie veroorzaken. In geval van contact met de huid grondig wassen met water en zeep. Bij contact met andere weefsels: gedurende enkele minuten overvloedig spoelen.

 Het gebruik van UV-, halogeen- en LED-uithardingslampen kan in verband worden gebracht met oogschade. De patiënt, de arts en de assistent moeten bij het gebruik van deze lichtuithardingsapparaten een goed ontworpen veiligheidsbril dragen.

 **TEMPERATUURBEPERKING:** Fluorideversie gekoeld bewaren (2-8°C).

Lichtgevoelig. Vermijd overmatige hitte. Laat het product op kamertemperatuur komen voor gebruik.



Niet-fluoride versie bewaren bij kamertemperatuur (15-30°C).

 Lichtgevoelig.

NABESTELLEN:

Spuiten met fluoride:

- Ref# UBLBPP voor Ultra Band-Lok® Blauw duwspuit
- Ref# UBLPP voor Ultra Band-Lok® Natuurlijke Tint duwspuit
- Ref# LLUBLBP voor Ultra Band-Lok® Blauwe Tint Luer-Loc injectiespuit met 10 tips
- Ref# LLUBLP voor Ultra Band-Lok® Natuurlijke Tint Luer-Loc injectiespuit met 10 tips

Spuiten Niet-Fluoride:

- Ref# NFUBLBPP voor Ultra Band-Lok® Blauw duwspuit NonFluoride
- Ref# NFUBLPP voor Ultra Band-Lok® Natuurlijke Tint duwspuit NonFluoride
- Ref# NFLLUBLBP voor Ultra Band-Lok® Blauwe Tint Luer-Loc injectiespuit met 10 tips

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products Inc. erkent haar verantwoordelijkheid om producten te vervangen als blijkt dat ze defect zijn. Reliance Orthodontic Products, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de producten zoals beschreven. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. De gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid in verband hiermee op zich.

ALLEEN RX: De federale wetgeving beperkt dit apparaat tot de aankoop door of in opdracht van een tandheekkundige.

NORWEGIAN TRANSLATION

INDIKASJONER FOR BRUK:

Ultra Band-Lok® er tiltenkt for bruk som matrise for ortodontisk sement og for okklusale oppbygginger.

INSTRUKSJONER FOR BRUK:

Sementering med matrise:


- Forbehandle tennene grundig med 1st & Final®. Skyll, tørk og isoler.
- Syreetsing av emaljen er ikke nødvendig for matrisesementering, men det anbefales når man skal sementere restaurasjoner som utsettes for høy belastning
- Påfør en ert med Ultra Band-Lok® på innsiden av matrisen.
- Plasser matrisen, rens av overflødig materiale. Plasser lysspissen i umiddelbar nærhet til tannens okklusale overflate. Lysherd i 30 sekunder med en langsom sirkelbevegelse rundt matrisens øvre del. Ved dette punktet er sementen fullstendig herdet, noe som muliggjør umiddelbar plassering.


Hvis du bruker sprøyter med luerlås:


- Skru av og fjern den svarte oppbevaringshetten fra sprøytespissen.
- Sett spissen på plass, og vri med klokken til spissen er låst i posisjon.
- Når prosedyren er fullført, fjernes spissen, og den svarte oppbevaringshetten settes på igjen for å holde Ultra Band-Lok® beskyttet mot lys.

Oppbygging av okklusal applikasjon: Forbehandle, skyll og tørk. Ets okklusale overflate i 30 sekunder, skyll deretter, tørk og isoler. Påfør Ultra Band i den mengde og form som kreves utfra den okklusale overflaten. Lyshering i 20 sekunder. Merk: en selvetsende primer kan brukes i stedet for etsemiddel med fosforsyre.

Viktig: Ultra Band-Lok® er følsom for omgivelseslys. Skjerm eksponert ikke-polymerisert produkt til produktet er klart til å lysheredes.

 **FORHOLDSREGLER:** Ikke-polymerisert resin kan forårsake hudirritasjoner hos mottakelige personer. Ved kontakt med huden, vask grundig med såpe og vann. Ved kontakt med annet vev: skyll det gjeldende området umiddelbart med store mengder vann i flere minutter.

 Bruk av UV-, halogen- og LED-herdelamper kan være forbundet med øyeskader. Pasienten, legen og assistenten skal bruke riktig utformede vernebriller når disse herdelampene brukes.

 **TEMPERATURBEGRENSNING:** Oppbevar versjon med fluor i kjøleskap (2-8°C). Lysfølsom. Unngå overdreven varme. La produktet nå romtemperatur før bruk.

 **15°C / 30°C** Oppbevar versjon uten fluor ved romtemperatur (15-30°C).

 Lysfølsom.

NY BESTILLING:

Sprøyter med fluor:

- Ref nr. UBLBPP for Ultra Band-Lok® Blue trykksprøyte
- Ref nr. UBLPP for Ultra Band-Lok® Natural trykksprøyte
- Ref nr. LLUBLBP for Ultra Band-Lok® Blue nyanse luerlås-sprøyte med 10 spisser
- Ref nr. LLUBLP for Ultra Band-Lok® Natural nyanse luerlås-sprøyte med 10 spisser

Sprøyter uten fluor:

- Ref nr. NFUBLBPP for Ultra Band-Lok® Blue trykksprøyte uten fluor
- Ref nr. NFUBLPP for Ultra Band-Lok® Natural trykksprøyte uten fluor
- Ref nr. NFLLUBLBP for Ultra Band-Lok® Blue nyanse luerlås-sprøyte uten fluor med 10 spisser

GARANTI: Reliance Orthodontic Products Inc. anerkjenner sitt ansvar for å erstatte produkter hvis de viser seg å være defekt. Reliance Orthodontic Products, Inc. påtar seg ikke ansvar for skader eller tap, direkte eller følgeskader, som stammer fra bruk av eller manglende evne til å bruke produktene som beskrevet. Før bruk er det brukerens ansvar å vurdere egnetheten til produktet for den tiltenkte bruken. Brukeren påtar seg all risiko og ansvar i forbindelse med dette.

BARE RX: Føderal lov i USA begrenser salg av denne enheten til eller etter ordre fra en tannlege.

POLISH TRANSLATION

WSKAZANIA DO STOSOWANIA:

Ultra Band-Lok® jest przeznaczony do stosowania jako cement ortodontyczny do pierścieni i do odbudowy okluzyjnej.

INSTRUKCJA STOSOWANIA:

Cementowanie pierścieni:


- Dokładnie przygotować zęby z użyciem pumeksu 1st & Final®. Splukać, osuszyć i odizolować ząb.
- Kwasowe wytrawianie szkliva nie jest konieczne w przypadku cementowania pierścieni, jednak zaleca się je w przypadku cementowania aparatów z pierścieniami poddawanych dużym obciążeniom.
- Nalożyć kulkę materiału Ultra Band-Lok® na wewnętrzną stronę pierścienia.
- Osadzić pierścień i usunąć nadmiar materiału. Umieścić końcówkę lampy w pobliżu powierzchni okluzyjnej zęba. Wykonywać powolne ruchy okrężne wokół górnej części pierścienia, utwardzając materiał przez 30 sekund. W tym momencie cement jest w pełni utwardzony, co pozwala na natychmiastowe umieszczenie.


Strzykawki Luer-Loc:

- Odkręcić i zdjąć czarną nasadkę z końcówki strzykawki.
- Nalożyć końcówkę i przekręcić ją w prawo, aż zablokuje się na swoim miejscu.
- Po zakończeniu procedury zdjąć końcówkę i założyć czarną nasadkę, aby chronić cement Ultra Band-Lok® przed światłem.

Nakładanie w przypadku odbudowy okluzyjnej: Przygotować, splukać i osuszyć. Wytrawiać powierzchnię okluzyjną przez 30 sekund, a następnie ją splukać, osuszyć i odizolować. Nalożyć cement Ultra Band w ilości i kształcie odpowiednim do powierzchni okluzyjnej. Utwardzać światłem przez 20 sekund. Uwaga: zamiast wytrawiania kwasem fosforowym można zastosować podkład samowytrawiający.

Ważne: Cement Ultra Band-Lok® jest wrażliwy na światło otoczenia. Oslaniać produkt niespolimeryzowany do czasu, aż będzie gotowy do utwardzenia światłem.

 **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:** Żywicze niespolimeryzowane mogą wywoływać u osób wrażliwych uczulenie na skórze. W przypadku kontaktu ze skórą umyć dokładnie wodą z mydłem. Kontakt z innymi tkankami: miejsce wycieku natychmiast przepłukiwać obficie wodą przez kilka minut.

 Stosowanie lamp utwardzających UV, halogenowych i LED może wiązać się z uszkodzeniem oczu. Podczas korzystania z wymienionych urządzeń do utwardzania światłem pacjent, lekarz i asystent powinni nosić prawidłowo zaprojektowane okulary ochronne.



OGRANICZENIE TEMPERATURY: Wersję fluorową przechowywać w lodówce (2–8°C). Produkt wrażliwy na światło. Unikać zbyt wysokich temperatur. Przed użyciem poczekać, aż produkt osiągnie temperaturę pokojową.



Wersję bezfluorową przechowywać w temperaturze pokojowej (15–30°C).



Produkt wrażliwy na światło.

ZAMAWIANIE:

Strzykawki z fluorem:

- Kod kat.: UBLBPP strzykawka tłokowa z Ultra Band-Lok® Blue
- Kod kat.: UBLPP — strzykawka tłokowa z Ultra Band-Lok® Natural
- Kod kat.: LLUBLBP — strzykawka Luer-Loc z 10 końcówkami z Ultra Band-Lok® Blue Shade
- Kod kat.: LLUBLP — strzykawka Luer Loc z 10 końcówkami z Ultra Band-Lok® Natural Shade

Strzykawki bez fluoru:

- Kod kat.: NFUBLBPP — strzykawka tłokowa z Ultra Band-Lok® Blue NonFluoride
- Kod kat.: NFUBLPP — strzykawka tłokowa z Ultra Band-Lok® Natural
- Kod kat.: NFLLUBLBP — strzykawka Luer-Loc z 10 końcówkami z Ultra Band-Lok® Blue Shade

GWARANCJA: Firma Reliance Orthodontic Products, Inc. odpowiada za wymianę produktów w przypadku stwierdzenia ich wadliwości. Reliance Orthodontic Products, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty bezpośrednie lub wtórne wynikające z użycia lub braku możliwości użycia produktów w sposób zgodny z opisem. Przed użyciem użytkownik odpowiada za określenie przydatności produktu do przewidzianego zastosowania. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność i ryzyko z tym związane.

PRODUKT DOSTĘPNY TYLKO NA RECEPTĘ: prawo federalne ogranicza sprzedaż tego wyrobu przez lekarza dentystę lub na jego zlecenie.

PORTUGUESE TRANSLATION

INDICAÇÕES DE USO:

Ultra Band-Lok® é destinado ao uso como cimento de banda ortodôntica e para acúmulos oclusais.

INSTRUÇÕES DE USO:

Cimentação de bandas:


- Faça bem a profilaxia dos dentes com a 1st & Final®. Enxágue, seque e isole.
- O condicionamento ácido do esmalte não é necessário para a cimentação de bandas; no entanto, é recomendada na cimentação de aparelhos com bandas de alta tensão
- Aplique uma gota de Ultra Band-Lok® no interior da banda.
- Adapte a banda, limpe qualquer excesso de flash. Posicione a ponta da luz na proximidade da superfície oclusal do dente. Movendo em um círculo lento ao redor do topo da banda, faça a fotopolimerização durante 30 segundos. Neste ponto o cimento está totalmente curado, permitindo a sua colocação imediata.


Se usar seringas Luer-Loc:

- Desparafuse e retire a tampa preta da ponta da seringa.
- Coloque a ponta no lugar e gire no sentido horário até que a ponta esteja bloqueada na posição.
- Quando o procedimento estiver concluído, retire a ponta e substitua a tampa preta de armazenamento para manter o Ultra Band-Lok® protegido da luz.

Aplicação de Acúmulo Oclusal: Faça a profilaxia, enxágue e seque. Condicione a superfície oclusal durante 30 segundos, depois enxágue, seque e isole. Aplique Ultra Band na quantidade e forma necessárias à superfície oclusal. Faça a fotopolimerização durante 20 segundos. Nota: pode ser usado um primer autocondicionante em vez de ácido fosfórico.

Importante: O Ultra Band-Lok® é sensível à luz ambiente. Proteja o produto não polimerizado até que o produto esteja pronto para ser fotopolimerizado.

 **PRECAUÇÕES:** As resinas não polimerizadas podem causar sensação cutânea em pessoas suscetíveis. Em caso de contato com a pele, lave bem com água e sabão. Contato com outros tecidos: lave imediatamente a área de derramamento com quantidades abundantes de água durante alguns minutos.

 O uso de fotopolimerização com UV, halogênios e LED pode estar associado a lesões oculares. O paciente, o médico e o assistente devem usar óculos de proteção projetados adequadamente ao usar estes dispositivos de fotopolimerização.



LIMITAÇÃO DE TEMPERATURA: A versão com flúor deve ser refrigerada (2-8°C). Sensível à luz. Evite o calor excessivo. Deixe que o produto atinja a temperatura ambiente antes de ser usado.



Armazenamento à temperatura ambiente para a versão sem flúor (15-30°C).



Sensível à luz.

PARA NOVO PEDIDO:

Seringas com flúor:

- Ref# UBLBPP para seringa push Ultra Band-Lok® Azul
- Ref# UBLPP para seringa push Ultra Band-Lok® Natural
- Ref# LLUBLBP para seringa Luer-Loc Ultra Band-Lok® Tom Azul com 10 pontas
- Ref# LLUBLP para seringa Luer-Loc Ultra Band-Lok® Tom Natural com 10 pontas

Seringas Sem Flúor:

- Ref# NFUBLBPP para seringa push sem-flúor Ultra Band-Lok® Azul
- Ref# NFUBLPP para seringa push sem-flúor Ultra Band-Lok® Natural
- Ref# NFLLUBLBP para seringa Luer-Loc sem-flúor Ultra Band-Lok® Tom Azul com 10 pontas

GARANTIA: A Reliance Orthodontic Products, Inc. reconhece a sua responsabilidade em substituir os produtos em caso de comprovação de defeitos. A Reliance Orthodontic Products, Inc. não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas, diretos ou consequentes, decorrentes do uso ou incapacidade de uso dos produtos, conforme descrito. Antes de usar, é responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto ao seu uso pretendido. O usuário assume todos os riscos e responsabilidades em relação a isso.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO: A lei federal restringe este dispositivo à venda por ou a pedido de um profissional odontológico.

ROMANIAN TRANSLATION

INDICAȚII DE UTILIZARE:

Ultra Band-Lok® este utilizat ca ciment ortodontic de lipire și pentru acumulări ocluzale.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Cimentarea inelului:


- Profilajii bine dinții cu 1st & Final®. Clătiți, uscați și izolați.
- Nu este necesară gravarea cu acid a smalțului pentru cimentarea inelelor; însă, aceasta se recomandă pentru cimentarea aparatelor inelare cu sarcină ridicată
- Aplicați un strat de Ultra Band-Lok® pe interiorul inelului.
- Plasați inelul, curățați orice material în exces. Poziționați vârful de lumină în apropierea suprafeței ocluzale a dintelui. Cu o mișcare circulară lentă în jurul părții superioare a inelului, fotopolimerizați timp de 30 de secunde. În acest moment cimentul este polimerizat complet, permițând plasarea imediată.


Dacă utilizați seringile Luer-Loc:


- Deșurubați și scoateți capacul negru de depozitare din vârful seringii.
- Fixați vârful și răsuciți spre dreapta până când vârful este blocat în poziție.
- După finalizarea procedurii, scoateți vârful și înlocuiți capacul de stocare negru pentru a păstra Ultra Band-Lok® protejat de lumină.

Aplicație pentru acumulări ocluzale: profilați, clătiți și uscați. Gravați suprafața ocluzală timp de 30 de secunde, apoi clătiți, uscați și izolați. Aplicați Ultra Band în cantitatea și forma necesară pentru suprafața ocluzală. Fotopolimerizați timp de 20 de secunde. Notă: poate fi utilizat un primer autogravant în locul gravării cu acid fosforic.


Important: Ultra Band-Lok® este sensibil la lumina ambientală. Protejați produsul nepolimerizat expus până când produsul este gata să fie fotopolimerizat.

 **PRECAUȚII:** rășina nepolimerizată poate provoca sensibilizarea pielii la persoanele susceptibile. În caz de contact cu pielea, spălați-vă bine cu apă și săpun. Contact cu alte țesuturi: clătiți imediat zona cu cantități abundente de apă timp de câteva minute.

 Utilizarea luminilor de polimerizare UV, halogen și LED poate fi asociată cu afectarea ochilor. Pacientul, medicul și asistentul trebuie să poarte ochelari de protecție specifici atunci când se utilizează aceste dispozitive de fotopolimerizare.

 **LIMITE DE TEMPERATURĂ:** versiunea cu fluor se păstrează la rece (2-8°C). Sensibil la lumină. Evitați căldura excesivă. Lăsați produsul să atingă temperatura camerei înainte de utilizare.

 Versiunea fără fluor se păstrează la temperatura camerei (15-30°C).

 Sensibil la lumină.

PENTRU COMANDARE ULTERIOARĂ:

Seringi cu fluor:

- nr. ref. UBLBPP pentru seringi push Ultra Band-Lok® albastru
- nr. ref. UBLPP pentru seringi push Ultra Band-Lok® natural
- nr. ref. LLUBLBP pentru seringi Luer-Loc Ultra Band-Lok® nuanță albastră cu 10 vârfuri
- nr. ref. LLUBLP pentru seringi Luer-Loc Ultra Band-Lok® nuanță naturală cu 10 vârfuri

Seringi fără fluor:

- nr. ref. NFUBLBPP pentru seringi push Ultra Band-Lok® albastru fără fluor
- nr. ref. NFUBLPP pentru seringi push Ultra Band-Lok® natural fără fluor
- nr. ref. NFLLUBLBP pentru seringi Luer-Loc Ultra Band-Lok® nuanță albastră fără fluor cu
- 10 vârfuri

GARANȚIE: Reliance Orthodontic Products Inc. își recunoaște responsabilitatea de a înlocui produsele dacă se dovedesc a fi defecte. Reliance Orthodontic Products, Inc nu își asumă răspunderea pentru daunele sau pierderile, directe sau pe cale de consecință, care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza produsele descrise. Înainte de utilizare, este responsabilitatea utilizatorului de a determina compatibilitatea produsului pentru utilizarea prevăzută. Utilizatorul își asumă toate riscurile și răspunderea în această privință.

NUMAI CU PRESCRIȚIE PENTRU UTILIZARE PROFESIONALĂ: legea federală restricționează vânzarea acestui dispozitiv de către sau la recomandarea unui specialist stomatolog.

SWEDISH TRANSLATION

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING:

Ultra Band-Lok ® är avsett för som ortodontiskt bandcement och för ocklusal påbyggnad.

BRUKSANVISNING:

Bandcementerung:


- Polera tänderna noggrant med 1st & Final ®. Skölj, torka och isolera.
- Syraetsning av emaljen krävs inte för cementering av band. Det är dock att rekommendera vid cementering av band som utsätts för hård belastning.
- Applicera en kula Ultra Band-Lok ® på insidan av bandet.
- Sätt på bandet, torka av eventuellt överskott. Placera ljusspetsen i närheten av tandens ocklusala yta. Ljushärda i 30 sekunder genom att föra spetsen långsamt i en cirkel runt bandets överdel. Cementet har nu helt härdat, vilket möjliggör omedelbar placering.


Om du använder Luer-Loc sprutor:

- Skruva loss och ta bort det svarta förvaringslocket från sprutans spets.
- Sätt på spetsen och vrid medurs tills den klickar fast.
- När proceduren är klar tar du bort spetsen och sätter tillbaka det svarta locket för att skydda Ultra Band-Lok ® från ljus.

Ocklusal påbyggnad: Polera, skölj och torka. Etsa den ocklusala ytan i 30 sekunder, skölj, torka och isolera. Applicera Ultra Band i den mängd och form som krävs för den ocklusala ytan. Ljushärda i 20 sekunder. Obs! En självetsande primer kan användas istället för etsning med fosforsyra.

Viktigt: Ultra Band-Lok ® är känsligt för omgivande ljus. Skydda exponerad icke-polymeriserad produkt tills produkten är klar för ljushårdning.

 **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:** Icke-polymeriserade hartser kan orsaka hudsensibilisering hos känsliga personer. Vid kontakt med huden, tvätta noggrant med tvål och vatten. Vid kontakt med andra vävnader: skölj omedelbart med stora mängder vatten i flera minuter.

 UV-, halogen- och LED-hårdningsljus kan orsaka ögonskador. Patienten, tandläkaren och assistenten ska bära korrekt utformade skyddsglasögon vid användning av dessa hårdningslampor.

 **TEMPERATURBEGRÄNSNING:** Fluoridförvaring lagras i kyl (2-8°C). Ljuskänslig. Undvik stark värme. Låt produkten nå rumstemperatur före användning.

 Version utan fluor, ska förvaras i rumstemperatur (15-30°C).

 Ljuskänslig.

FÖR ATT BESTÄLLA PÅ NYTT:

Sprutor med fluor:

- Best.kod: UBLBPP för Ultra Band-Lok ® Blue spruta
- Best.kod: UBLPP för Ultra Band-Lok ® Natural spruta
- Best.kod: LLUBLBP för Ultra Band-Lok ® Blue Shade Luer-Loc spruta med 10 spetsar
- Best.kod: LLUBLP för Ultra Band-Lok ® Natural Shade Luer-Loc spruta med 10 spetsar

Sprutor utan fluor:

- Best.kod: NFUBLBPP för Ultra Band-Lok ® Blue spruta utan fluor
- Best.kod: NFUBLPP för Ultra Band-Lok ® Natural spruta utan fluor
- Best.kod: NFULLBPP för Ultra Band-Lok ® Blue Shade Luer-Loc-spruta utan fluor med 10 spetsar

GARANTI: Reliance Orthodontic Products Inc. ansvarar för att ersätta produkter som har visats vara defekta. Reliance Orthodontic Products, Inc ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster som härrör från användning av eller felaktig användning av produkterna enligt beskrivningen. Före användning ansvarar användaren för att fastställa huruvida produkten är lämplig för den avsedda användningen eller inte. Användaren påtar sig all risk och allt ansvar i samband med användning.

ENDAST MOT RECEP: Enligt federal lagstiftning i USA får denna enhet endast säljas av eller på ordination av en tandläkare.


INSTRUCTIONS FOR USE

V1.11.20 
2797



RELIANCE®

**ORTHODONTIC
PRODUCTS**

 Reliance Orthodontic Products, Inc.
1540 W. Thorndale Ave. Itasca, IL 60143 USA
1-800-323-4348 | Made in USA | Rx Only
RelianceOrthodontics.com

**AUSTRALIAN SPONSOR,
EMERGO AUSTRALIA,**

Level 20, Tower II,
Darling Park,
201 Sussex St, Sydney,
NSW 2000, Australia

EC REP

EMERGO EUROPE,
Prinsessgracht 20,
2514 AP The Hague,
The Netherlands

MD

Check out our new learning platform Reliance U!
www.RelianceU.tech

Scan for more
information

