

Promoções Kerr Iberia

1 Janeiro - 27 Março 2026



Kerr™

RESTAURADORA

P. 2 - 10

ENDODONTIA

P. 11-13

PROFILAXIA/
CONTROLE INFECÇÃO

P. 14-15

SimpliShade™

Compósito Universal Simplificado

Só com três tons consegue-se os 16 da guia VITA Classical.
A seleção da cor é mais fácil e rápida.



SimpliShade Seringa 4g

P.V.P. recomendado 63,71€

SimpliShade Unidose 10 unidades

P.V.P. recomendado 50,96€

SimpliShade Unidose 20 unidades

P.V.P. recomendado 76,46€



Promoção 43€/unidade
comprando 4

Promoção 35€/unidade,
comprando 4

Promoção 52€/unidade,
comprando 4

SimpliShade Bulk Fill

Indicado para restaurações de classes I-V, restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores, reconstrução de falsos cotos e reparação de defeitos em restaurações.



37211 Seringa x 4g

P.V.P. recomendado 66,00€

37212 Unidose (20 unidoses x 0.25g)

P.V.P. recomendado 87,50€

Promoção 43€/unidade
comprando 2

Promoção 57€/unidade,
comprando 2

SimpliShade Bulk Fill Flow

Indicado como base/liner em restaurações diretas de classe I e classe II, selante de fissuras, restaurações de cavidades pequenas, restaurações de classe III e classe V, reconstrução de falsos cotos pequenos e reparação de restaurações provisórias de resina e acrílico.



37217 Seringa 2x2g

P.V.P. recomendado 66,00€

37218 Unidose (20 unidoses x 0.25g)

P.V.P. recomendado 87,50€

Promoção 43€/unidade,
comprando 2

Promoção 57€/unidade,
comprando 2



OptiBond™ Universal 360

Adesivo Universal de um Único Componente

Todas as técnicas. Qualquer material. Uma única solução de adesão. A única para tudo.

Conhece OptiBond Universal 360, o novo e revolucionário agente adesivo que oferece o melhor resultado para todos os profissionais, independentemente dos materiais que utilizem ou as técnicas que sigam. Não importa quais sejam os teus objetivos, OptiBond Universal 360 pode ajudar a tua clínica a alcançá-los com facilidade.



Solução Multiusos e Universal

OptiBond Universal 360, que conta com a tecnologia GPDM patenteada de Kerr e agora enriquecida com MDP, é um sistema verdadeiramente universal que oferece uma resistência de adesão confiável para todas as superfícies e substratos, com qualquer cimento de resina, inclusive na ausência de luz. Esta solução num único frasco oferece a flexibilidade de usar-se com qualquer técnica de condicionamento, tanto em restaurações diretas como indiretas.



Resistência adesiva excepcional

OptiBond Universal 360 oferece resultados de resistência adesiva iguais ou superiores em combinação com os cimentos Kerr e os principais concorrentes, inclusive sem luz (dark cure), sem produtos auxiliares.



Desenho do frasco melhorado

Graças ao novo desenho ergonómico do frasco, só necessitas uma mão para abrir, dispensar e fechar. Além disso, podes usar o conta gotas para dispensar uma gota de tamanho preciso em cada aplicação, sem te preocupares com gotas antes e depois. Isto gera menos desperdício e mais eficiência.

Revoluciona a tua prática com a solução de um único frasco



Capacidade de polimerização sem luz otimizada

OptiBond Universal 360 otimiza na sua fórmula o equilíbrio entre hidrofília e hidrofobicidade para evitar a separação de fases na interface entre o adesivo e o cimento de resina. Isto melhora a polimerização completa, inclusive no modo de polimerização em ausência total de luz.



Três Solventes em Um

A tecnologia patentada do sistema de solvente ternário de Kerr e o equilíbrio ótimo de hidrofobicidade e hidrofília permitem que OptiBond Universal 360 proporcione uma excelente penetração nos túbulos dentinários, o que lhe oferece uma força de adesão extraordinária e proteção contra a microinfiltração e a sensibilidade pós-operatória.



Fácil armazenamento

Guarda OptiBond Universal 360 à temperatura ambiente. A diferença de outros agentes adesivos, é que não requer refrigeração.



Sensibilidade Pós-operatória Mínima

OptiBond Universal 360 garante uma penetração ótima nos dentes para preparar e selar a dentina, o que ajuda a reduzir o risco de sensibilidade pós-operatória.

A VANTAGEM DE COMBINAR DOIS MONÓMEROS

PROPRIEDADES	GPDM	MDP	
			
Acidez	pH mais baixo.	pH mais alto.	OptiBond Universal 360 Fórmula adesiva com hidrofília-hidrofobicidade e pH otimizados, para uma maior compatibilidade com substratos e requisitos de armazenamento cómodos.
Hidrofília / Hidrofobicidade	Maior hidrofília.	Maior hidrofobia.	
Grupo de ancoragem de adesão	Adesão através do grupo fosfato.	Adesão através do grupo fosfato.	
Reticulação com resina	Dois grupos funcionais para a reticulação à resina.	Um grupo funcional para a reticulação à resina.	



Informação para pedidos

Ref #	Descrição
36822	OptiBond Universal 360 - Bottle Refill Contêm: 1 frasco OptiBond Universal 360 de 5ml

P.V.P. recomendado 135,65€

Promoção

105€



Para mais informação, visite
to.kerrdental.com/es/optibond360

Facetas Diretas com a Técnica de Copiar e Reproduzir



Guia passo a passo pelo Dr. Ahmed Samer Tadfi

Passo 1: Preparação do registo de impressão




Depois de aprovar o desenho digital e receber a impressão de prova em 3D ou o modelo de gesso do laboratório, use uma moldeira de impressão transparente para aplicar o material de impressão transparente e criar um registo de impressão.

Passo 2: Preparação dos dentes para as facetas




Utilize a broca de diamante FG 868B-020 para a guia de profundidade de corte e marque a profundidade com um lápis para indicar onde cortar. Utilize OptiDisc™ (Kerr) de grão grosso e a broca de diamante FG 850M-016 para rebaixar as zonas marcadas. Em seguida, alise com a broca de diamante FG 849F-014, OptiDisc (Kerr) de grão grosso-medio e uma tira de polimento.

Passo 3: Criação de facetas com composite Harmonize™

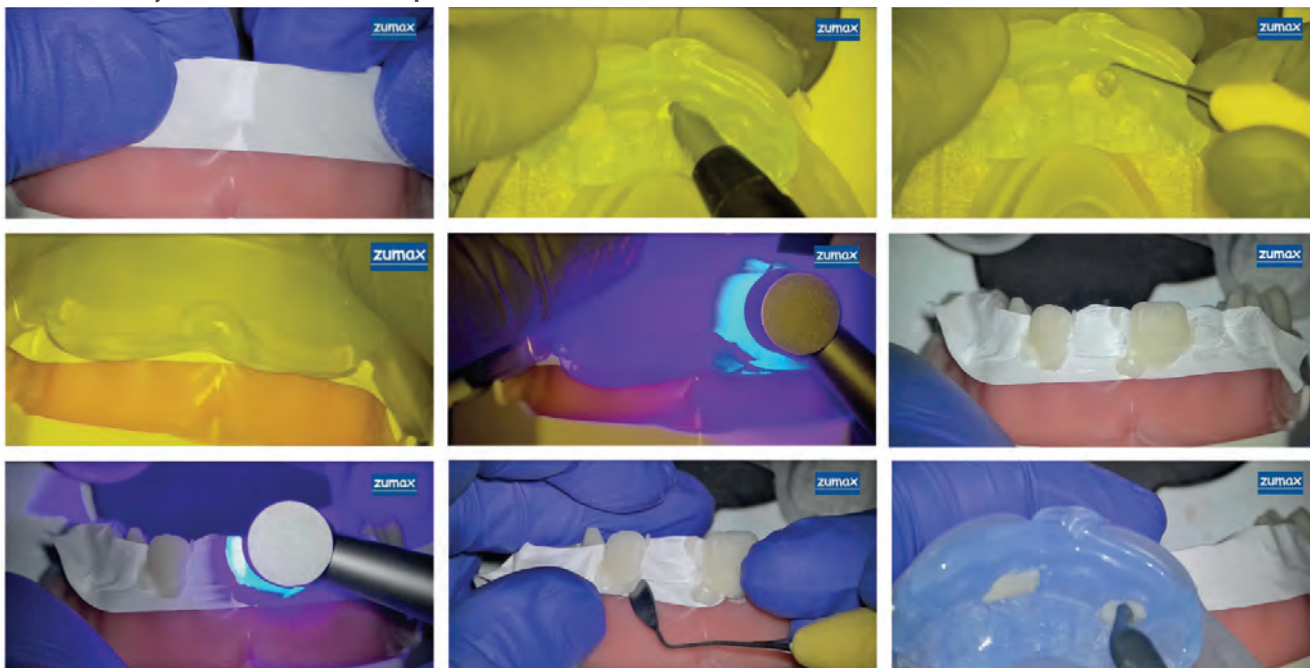


Tape os respectivos dentes com teflón para criar espaço para a adesão e o composto fluido, e para facilitar a sua extração. Aplique composto Harmonize A2 (Kerr) no registo de impressão transparente dos dentes n.º 11 e n.º 22. Volte a colocar a moldeira na boca do paciente com o compósito (sem polimerizar) e pressione com firmeza. Mantendo a pressão firme, solicite á sua assistente que fotopolimerize cada dente durante 20 segundos através de moldeira transparente ou do registo da impressão. Retire o registo de impressão transparente e fotopolimerize de novo durante 20 segundos. De seguida, retire as facetas do teflón ou do registo de impressão. Repita estes passos para os dentes n.º 12 e n.º 21. Por último, retire o teflón de todas as peças.

Passo 4: Polimento da faceta de compósito

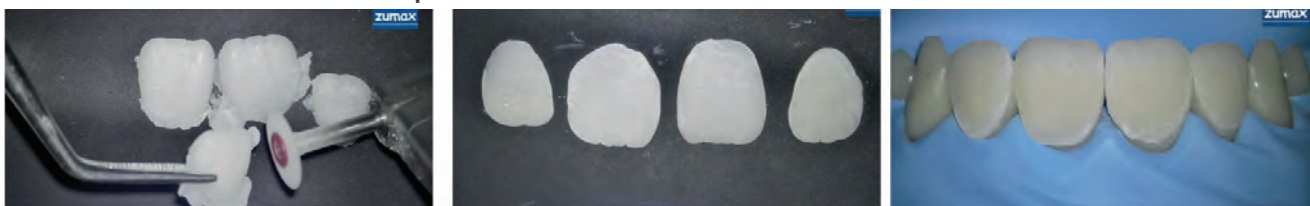

Retire o excesso de compósito e dê forma às facetas com OptiDisc grão grosso. De seguida, teste as facetas sobre os respectivos dentes.

Passo 5: Fixar as facetas de compósito aos dentes

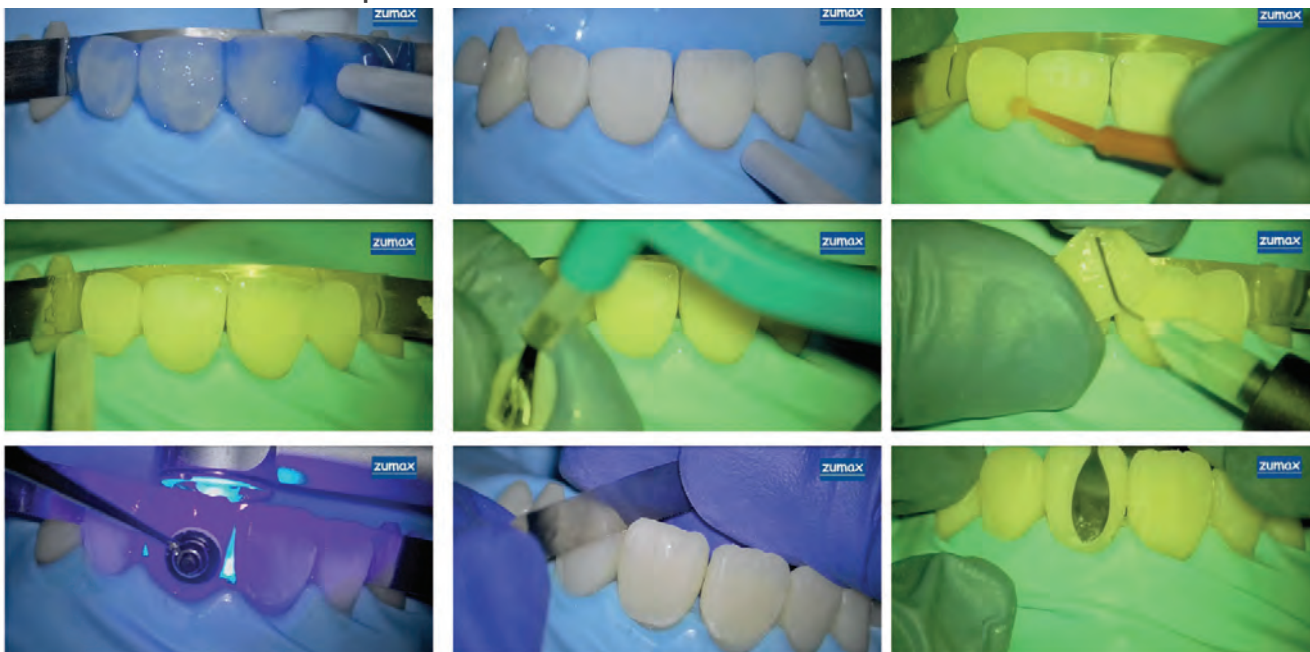

Condicione os dentes preparados com Gel Etchant (Kerr) durante 30 segundos. Enxague o gel e seque suavemente com ar. Aplique OptiBond™ Universal (Kerr) tanto nos dentes preparados como nas facetas NÃO FOTOPOLIMERIZE! Antes de colocar as facetas sobre cada preparação aplique uma pequena quantidade de compósito fluido, como SimpliShade™ Bulk Fill Flow (Kerr), sobre as facetas. Retire o excesso de compósito com um aplicador ou fio dentário. Fotopolimerize durante 2 segundos. Retire o excesso de compósito. Fotopolimerize durante 20 segundos. Retire o excesso de adesivo e compósito com uma tira de polimento, um instrumento LM para excessos ou uma lamina curva 12C. Adicione compósito Harmonize A2 (Kerr) se for necessário nas zonas defeituosas ou deficientes.

Passo 6: Polimento da faceta de compósito



Para polir as faces proximais de cada faceta e dente, utilize uma tira de polimento. Se necessita melhorar ou modificar os ângulos das facetas utilize o disco OptiDisc de grão grosso como se pode ver na imagem. Para polir as margens, utilize a broca de diamante FG 859F-010.

Para criar a micro-anatomia (opcional, uma vez que é geralmente replicado a partir do mockup), utilize a broca de diamante FG 859F-010 para dar mais textura superficial às facetas. De seguida, utilize uma pedra de Arkansas branca para formar sulcos e lóbulos. Alise as facetas com Occlubrush™ (Kerr). Para um acabamento brilhante, utilize o sistema Lucida (Styleitaliano), que inclui um disco de polimento em forma de estrela e pasta de polimento de diamante.



Dr Ahmed Samer Tadfi r Ahmed Samer Tad licenciou-se na Universidade de Birmingham em 2014 e concluiu com sucesso o seu programa de formação. Trabalha atualmente num consultório dentário privado em Londres. Numa fase inicial da sua carreira tem lecionado tanto a nível nacional como internacional. Ele também tem seu próprio curso de compósito em Londres. Em 2018, recebeu vários prémios; Best Young Dentist UK 2018, Best Young Private Dentist 2018 e internacionalmente o vencedor do concurso Styleitaliano. Mais recentemente, ele foi admitido na equipe Styleitaliano como membro ativo em 2019.

O Dr. Tadfi é consultor da Kerr. As opiniões e a técnica expressadas neste artigo baseam-se na experiência do Dr. Tadfi. A Kerr é um fabricante de dispositivos médicos e não oferece conselho médico. Os profissionais clínicos devem usar o seu próprio critério profissional ao tratar os seus pacientes.

Harmonize™ Compósito Universal com Tecnologia ART

Restaurações naturais graças às suas nanopartículas e à tecnologia ART.



Disponível em:
Esmalte: 16 cores (escala VITA), 1 XL
Dentina: 7 cores, 1 XL2
Incisal: 5 incisais translúcidos Seringa
4g
Harmonize Seringa

P.V.P. recomendado 84,64€

Promoção **51€/unidade,**
comprando 4

Herculite® XRV Ultra™ Flow

Compósito Fluido Nanohíbrido

Incorpora um aditivo reológico que ajuda a reduzir a tensão superficial á medida que o material entra em contato com a superfície do dente sob pressão, o que permite fluir até aos limites da restauração. O mesmo aditivo fomenta uma maior tensão superficial depois que se tenha colocado o material. A fórmula também garante resistência á flexão, assim como uma excelente retenção do brilho e uma fácil capacidade de polimento.



- 35407 A1
- 35408 A2
- 35409 A3
- 35410 A3.5
- 35411 A4
- 35412 B1
- 35413 B2
- 35414 C2
- 35415 D2
- 35418 Universal Opaco
- 35416 XL1
- 35417 XL2


Contêm
2 Seringas (2 g cada uma), 20 pontas de
dispensação

P.V.P. recomendado 60,03€

Promoção **39€/unidade,**
comprando 2

MetaFix™

MetaFix™ All-in-One é uma matriz com um inovador sistema integrado de abertura e ajuste.

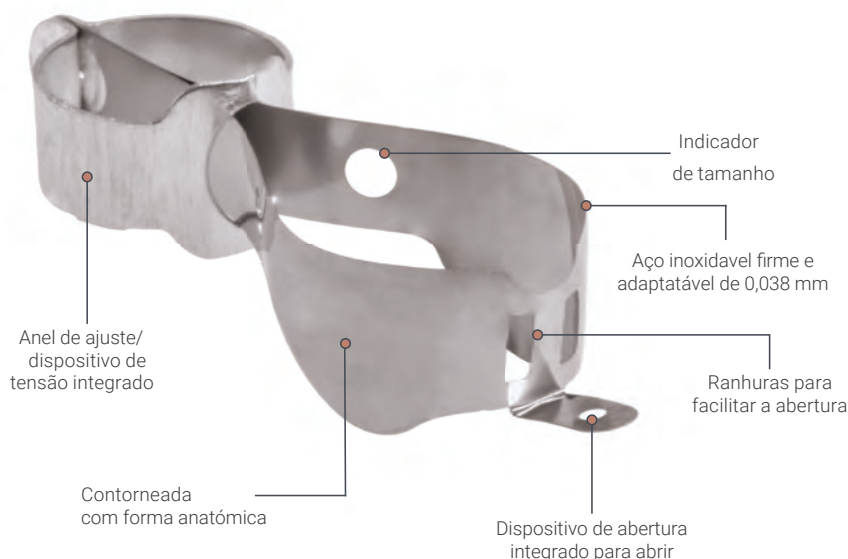

MetaFix™ — Reposições

Medida	Perímetro máx da matriz aberta	Perímetro máx da matriz fechada	Altura da área proximal	C x 50
Pequena (premolar)	27 mm	19 mm	6.7 mm	3601
Media (Molar normal)	33 mm	25 mm	6.3 mm	3602
Grande (Molar grande)	40 mm	32 mm	7.8 mm	3603

Reposições MetaFix

P.V.P. recomendado 88,57€

Promoção **53€/unidade**

Maxcem Elite™ Cimento de Resina Universal

O cimento de resina auto-adesivo e auto-condicionante Maxcem Elite™ para restaurações indiretas oferece uma simplicidade refinada e a melhor adesão da sua classe em comparação com outros cimentos auto-adesivos líderes.

- A sua propriedade tixotrópica facilita a colocação do material e a limpeza
- Limpeza One-Peel™, sem necessidade de mistura manual nem refrigeração
- Mecanismo de dupla polimerização
- Sem descoloração
- Compatível com todas as restaurações indiretas



Limpeza One-Peel™

A propriedade tixotrópica de Maxcem Elite facilita a colocação do material e a sua fácil limpeza.



Combina Maxcem Elite Universal com OptiBond Universal 360 para uma maior resistência

O uso combinado de OptiBond Universal 360 e Maxcem Elite melhora a resistência da união do cimento. A diferença de outros cimentos de resina, Maxcem Elite não contém grupos de aminas básicas que inibem o processo de polimerização. Em consequência, a auto-polimerização do cimento não se vê afetada quando entra em contato com a capa adesiva ácida.

Reposições
2 Seringas Automix x 5g + pontas
34058 Transparente
34059 Branco
34060 Opaco
34061 Amarelo

P.V.P. recomendado 154,59€

Promoção **88€/unidade,**
comprando 2

NX3 Cimento de resina de polimerização dual

NX3 é um sistema de cimento de resina definitivo, indicado para todas as aplicações indiretas.

NX3 pode-se utilizar com um sistema de adesão de condicionamento total, condicionamento seletivo ou auto-condicionamento.

A variante fotopolimerizável é ideal para facetas e outras indicações que requerem um tempo de trabalho ilimitado.



Contém 5g Seringa Automix Dual Cure
33644 Branco
33645 Amarelo
33646 Branqueamento
33647 Branco Opaco

P.V.P. recomendado 122,05€

Contém seringa Light-Cure 1.8 g 33648
Clear
33649 Branco
33650 Amarelo
33651 Branqueamento
33652 Branco Opaco


P.V.P. recomendado 58,23€

Promoção **75€/unidade,**
comprando 2

Oferta **37€/unidade,**
comprando 2


Optidisc®

Disco para acababamento e polimento com alto desempenho

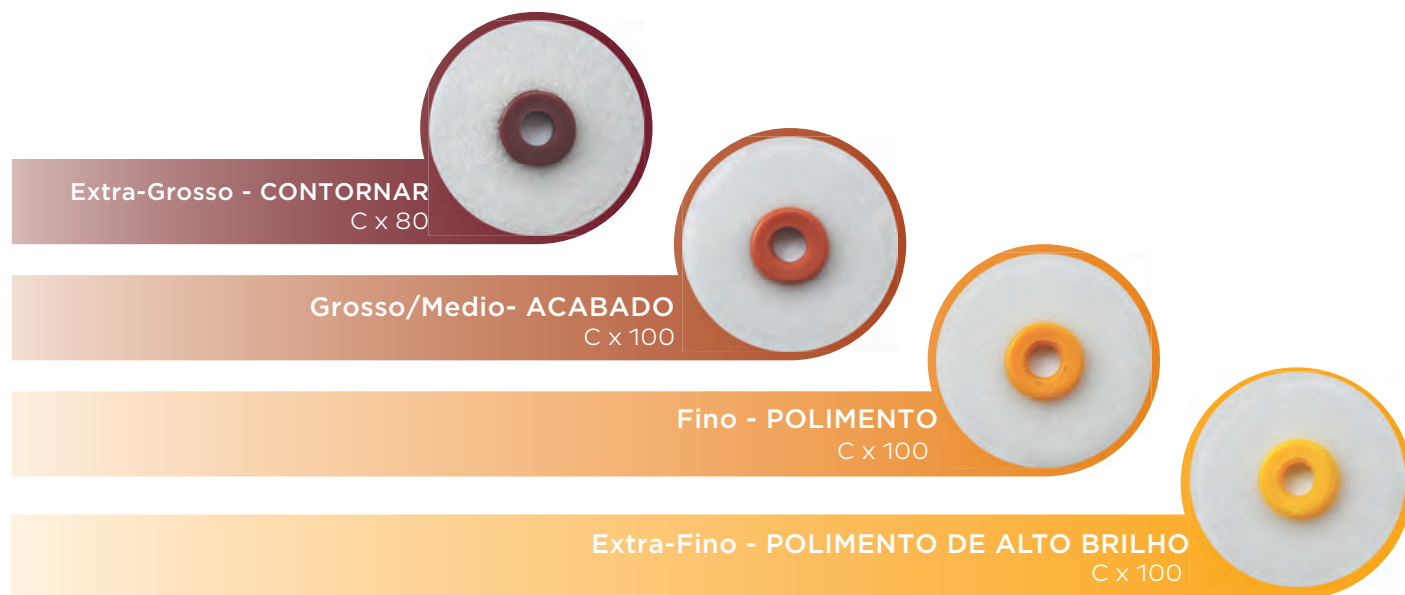

FLEXIVEL E PRECISO

O mandril mais curto e a flexibilidade do disco permitem chegar com facilidade á zona posterior e outros pontos restritos. O material transparente proporciona uma grande visibilidade durante o trabalho para aumentar a precisão na fase de acabamento e polimento.

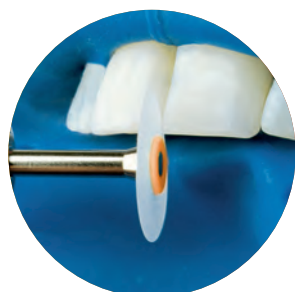


Preciso



Flexivel



Transparente

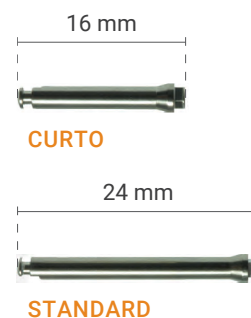

Optidisc Reposições

P.V.P. recomendado 39,18€

Promoção **23€/unidade,**
comprando 2

K-Files™

Limas Manuais

C x 6

P.V.P. recomendado 12,19€



Promoção 8,50€/unidades
comprando 4

ZenFlex™

Resistência Máxima. Mínimamente Invasiva.

Com um equilíbrio ideal entre resistência e flexibilidade, ZenFlex permite alcançar a longitude de trabalho completa com um risco reduzido de fratura e preservando uma maior integridade dos dentes.

C x 6

P.V.P. recomendado 48,38€



Promoção 33€/unidade,
comprando 4

ZenFlex Gutta

Os procedimentos de instrumentação estão a ponto de se tornarem ainda mais simples. Apresentamos a nossa nova gutapercha ZenFlex, fácil de usar y desenhada para se adaptar aos diversos tamanhos de pontas de limas NiTi ZenFlex e aos diversos procedimentos de canais radiculares.

- Pontas que se adaptam aos canais instrumentados com limas NiTi ZenFlex
- Aplicação sem preocupações, sem látex de borracha natural
- Excelente adaptação a uma ampla variedade de profundidades de canais

C x 50

P.V.P. recomendado 25,5€



Promoção 20€/unidade,
comprando 2

ZenFlex adapta-se às *tuas* necessidades

com uma ampla seleção de configurações de ponta e conicidade

Informação para pedidos

ZenFlex™ - Caixa de 6

Taper	Tip	21 mm	25 mm	31 mm
.04	.20	818-1206	818-1207	818-1208
.04	.25	818-1256	818-1257	818-1258
.04	.30	818-1306	818-1307	818-1308
.04	.35	818-1356	818-1357	818-1358
.04	.40	818-1406	818-1407	818-1408
.04	.45	818-1456	818-1457	818-1458
.04	.50	818-1506	818-1507	818-1508
.04	.55	818-1556	818-1557	818-1558
.06	.20	818-2206	818-2207	818-2208
.06	.25	818-2256	818-2257	818-2258
.06	.30	818-2306	818-2307	818-2308
.06	.35	818-2356	818-2357	818-2358
.06	.40	818-2406	818-2407	818-2408
.06	.45	818-2456	818-2457	818-2458
.06	.50	818-2506	818-2507	818-2508
.06	.55	818-2556	818-2557	818-2558

ZenFlex™ Pontas de Gutta Percha - Caixa de 50

Taper	Tip	30 mm
.04	.20	825-9820
.04	.25	825-9825
.04	.30	825-9830
.04	.35	825-9835
.04	.40	825-9840
.04	.45	825-9845
.06	.20	825-9920
.06	.25	825-9925
.06	.30	825-9930
.06	.35	825-9935
.06	.40	825-9940
.06	.45	825-9945

ZenFlex™ - Sortido Caixa de 6

Taper	Tip	21 mm	25 mm
.04	.20	818-1421	818-1425
	.25		
.06	.20	818-1621	818-1625
	.25		

ZenFlex™ Pontas de Gutta Percha - Sortido Caixa de 60

Taper	Tip	30 mm
.04	.20	825-9800
	.25	
.06	.20	825-9900
	.25	



Para maior flexibilidade e controle, **ZenFlex funciona com o teu motor endodóntico e peças de mão habituais.**

Obturação Endodôntica

elements™ IC Sistema de Obturação sem fios



Desenho ergonómico para um pega
comoda e equilibrada



Carga completa das baterias em menos de
3 horas



Carga Indutiva: SEM CONECTORES
ELÉCTRICOS entre as peças de mão e a
base



Obturação 3D do canal radicular de alta
qualidade



Redução do tempo de inatividade graças a
uma extrusão acelerada
Regula com precisão a velocidade de saída
da guttapercha desde o cartucho



elements IC Dual charge
973-0600-TYPEF

P.V.P. recomendado 3890,17€

Promoção

**elements IC Dual
+ Heat Pluguer Buchanan**
2.800€

Pluguers Buchanan a escolher entre


952-0031 Extra fino 04
952-0004 Fino 06
952-0005 Fino/medio 08
952-0006 Medio 10
952-0007 Medio/grande 12



Cleanic®

Pasta para limpeza e polimento de um só passo com variabilidade de limpeza integrada: durante os primeiros segundos de uso, a pasta exerce um alto poder de limpeza que se converte numa suave acção de polimento á medida que as partículas de perlita se fragmentam.

Sem glúten
nem lactose

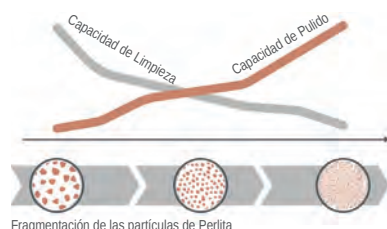

Fragmentación de las partículas de Perlita

Tubo x 100 g
3380 Cleanic Menta
3382 Cleanic Maçã
3183 Cleanic Menta sem Flúor
3384 Cleanic Light
3386 Cleanic Frutos Vermelhos

P.V.P. recomendado 30,16€



Promoção 16€/unidade,
comprando 2

Cleanic em Tubo

3330 con Fluoreto
3230 sin Fluoreto
Contêm: 100g

P.V.P. recomendado 35,3€



Promoção 22€/unidade,
comprando 2

Pro-Cup™

A gama patenteada Pro-Cup™ permite a aplicação económica e sem salpicos da pasta profilática.

O perfil laminar interior e exterior impulsiona a pasta profilática e a saliva até á borda da copa mediante um principio helicoidal, minimizando os salpicos.

Pro-Cup é o acessório óptimo para a limpeza e o polimento, independentemente da situação clínica e das preferências do profissional.



990/30 - Latch-type C x 30

P.V.P. recomendado 34,85€

990/120- Latch-type C x 120

P.V.P. recomendado 97,94€

Promoção 20€/unidade,
comprando 2

Promoção 58€/unidad

Desinfecção e limpeza de superfícies

CaviCide™

Desinfetante de superfícies de dispositivos médicos

CaviCide é um desinfetante de nível intermedio cómodo e pronto para usar, eficaz contra TB, HBV, HCV, HIV, vírus (hidrofílicos e lipofílicos), bactérias, (incluindo MRSA e VRE), e fungos. Pode-se usar em todas as áreas das instalações, incluídas na UCI, nos blocos operatórios, nas salas de isolamento, nas áreas de atendimento ao paciente e nos laboratórios.

4731223
CaviCide Garrafão 5l
P.V.P. recomendado 59,32€



Promoção

43€

CaviWipes™

Toalhetes de limpeza e desinfetantes prontas a usar

Processo fácil de 2 passos: um toalhete limpa e o segundo desinfeta a superfície do seu dispositivo médico, sem ter que misturar produtos químicos. A fórmula com baixo conteúdo de álcool evita que a carga biológica se torne insolúvel e adira tenazmente às superfícies. Para uma limpeza e desinfecção mais eficaz.

Durável: o tecido não tecido permite que o mesmo permaneça intato, sem enrugar nem secar durante o uso.

4731160
CaviWipes 12 Boiões x 160
toalhetes húmidos (15,24 x
17,15 cm)
P.V.P. recomendado 118,88€
0,06€/toalhete



Organismo e tempo de exposição

Organismo	Tempo de exposição
Mycobacterium tuberculosis var: bovis (BCG) ³	3 minutos
Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ⁹	3 minutos
Pseudomonas aeruginosa ⁴	1 minuto
Salmonella enterica ⁹	3 minutos
Staphylococcus aureus ⁴	1 minuto
Vancomycin Resistant Enterococcus faecalis (VRE) ⁹	2 minutos
Staphylococcus aureus with reduced susceptibility to vancomycin ⁹	2 minutos
Enterococcus hirae ⁴	1 minuto
Escherichia coli ⁴	1 minuto
Proteus mirabilis ⁴	1 minuto


Organismo	Tempo de exposição
SARS-associated Human Coronavirus (SARS-COV-1) ⁵	3 minutos
SARS-associated Human Coronavirus 2 (SARS-COV-2) (COVID-19 Virus) ¹⁰	2 minutos
Human Coronavirus ⁵	2 minutos
Hepatitis B virus (HBV) ⁵	2 minutos
Hepatitis C virus (HCV) ⁵	2 minutos
Human Immunodeficiency Virus (HIV-1) ⁵	2 minutos
Herpes Simplex Virus Types 1 and 2 ⁵	2 minutos
Influenza A2 Virus ⁵	2 minutos
Modified Vaccinia Virus Ankara (MVA) ⁶	5 minutos
Candida albicans ⁷	1 minuto ⁸
Trichophyton mentagrophytes ⁹	3 minutos

Ainda não te juntaste à nossa rede digital? Não percas o que partilhamos!

Na Kerr Iberia partilhamos conteúdos relevantes para profissionais do setor dentário: inovação, lançamentos, casos de sucesso e muito mais. Segue-nos e forma parte da nossa rede de profissionais apaixonados pela odontologia.

Segue-nos.


Clica em follow, comenta, partilha... e sorri connosco!

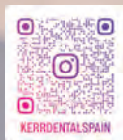

@kerrdentalspain



Kerr Dental Spain

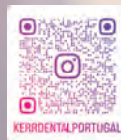

@kerrdentalportugal



Kerr Dental Portugal

Equipa Kerr Iberia

Carlos López
Regional Sales Leader Kerr Iberia
Tel. +34 629446950
carlos.lopez@envistaco.com
Anabela Gens
KAM Kerr Portugal
Tel. +351 917872528
anabela.gens@envistaco.com
Mercedes Hurtado
Marketing Manager Kerr Iberia
Tel. +34 606965603
mercedes.hurtado@envistaco.com
Eva Olivé
Sales Assistant Kerr Iberia
Tel. +34 932452982 +34 647515443
eva.olive@envistaco.com

Sales Rep Espanha

Ciό Mateu
Telesales
Almería, Cuenca, Ibiza, Menorca, Palencia, Teruel, Zamora, Comunidad Valenciana, Murcia
Tel. +34 916258011 +34 697790901
cio.mateu@envistaco.com
Joana Barquín
Cataluña, Mallorca, Huesca y Zaragoza
Tel. +34 638928338
joana.barquin@envistaco.com
Juan Carlos Yañez
Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Burgos, León
Tel. +34 674649197
juancarlos.yanez@envistaco.com
Gabriel Bassy
Madrid, Castilla La Mancha (excepto Cuenca), Soria, Segovia, Ávila, Valladolid, Guadalajara
Tel. +34 648036279
gabriel.bassy@envistaco.com

Oscar Rodríguez
Andalucía (excepto Almería), Extremadura, Islas Canarias
Tel. +34 647572937
oscar.rodriguez@envistaco.com

Sales Rep Portugal

Mário Andrade
Norte de Portugal
Tel. +351 910536917
mario.andrade@envistaco.com
Susana Guerreiro
Lisboa, Beja, Évora, Faro, Portalegre, Setúbal, Madeira, Açores
Tel. +351 914674187
susana.guerreiro@envistaco.com
Marta Bastos
Lisboa, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Santarém
Tel. +351 913340621
marta.bastos@envistaco.com

Serviço Telesales da Kerr

O teu gestor comercial telefónico com quem podes consultar promoções personalizadas baseadas nos teus hábitos operativos. Informará com prioridade de todas as promoções especiais relacionadas com os produtos Kerr que utilizas regularmente ou sobre os que solicitas atualização. Tudo isso por telefone ou email em função das tuas necessidades e fornecido através do teu depósito dental habitual.

+34 916 258 011

+34 697 790 901

telesales.iberia@kerrdental.com

Preços válidos exepcto erro tipográfico

DH Dental Iberia SL |
Valgrande, 8, Edif. Thanworth II | 28108 Alcobendas | España |
+34 932452982 | www.kerrdental.com

MKT-25-1548 Rev 0 Kerr Dental

Kerr™